

Im Überblick

Hörsystem-Portfolio



Vielseitig wie die Anforderungen Ihrer Kunden – unser Portfolio

IdO

Klein, unauffällig, diskret und vielseitig

RIC

Eine neue Dimension der Technik

HdO

Für jeden Hörverlust das passende Hörsystem

UNSER PORTFOLIO



Batterie	Icon	Sina	Vega	Ida	quiX	Rixx	Mood
	10	10	312	312	10 / 312	10	312
TL 16	Neu	Neu		Neu	Neu	Neu	
TL 12	Neu	Neu		Neu	Neu	Neu	
TL 8	Neu	Neu		Neu	Neu	Neu	
TL 6							
TL 4							
TL 3							
Basis							



Akku	Sun	Sun Li-Ion	XS	DUO	DUO Li-Ion	P	HP
Akku	13	Akku	312	13	Akku	13	675
Neu					Neu ab 2/2019	Neu	
Neu					Neu ab 2/2019	Neu	
Neu					Neu ab 2/2019	Neu	

UNSER PORTFOLIO

Die IdO-Systeme in der Übersicht

Durch jahrelange Erfahrung überzeugt unser IdO-Sortiment durch innovative Technik und Kleinheit.

Mit Ida BT G5, dem ersten *Bluetooth®* fähigem IdO-Hörsystem von Audio Service, vereinen wir Konnektivität und weitere innovative G5-Features in einem Hörsystem.



Wireless

Die Hörsysteme Icon, Sina, Vega und Ida der TL 4–16 sind optional mit Wireless erhältlich und bieten dadurch zusätzliche Funktionen sowie die Bedienung per Fernbedienung oder Audio Streaming (G4).

Icon



Sina





















Vega



Ida



Batterie	10	10	312	312
Bedienung	Taster (G4 Mini-CIC)	Taster	Taster	Wippschalter / Taster

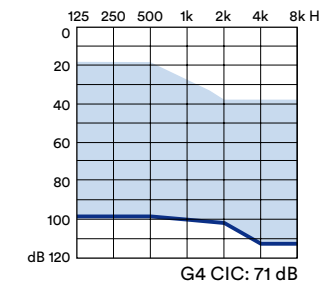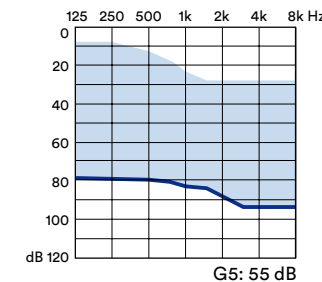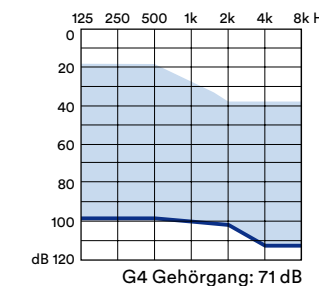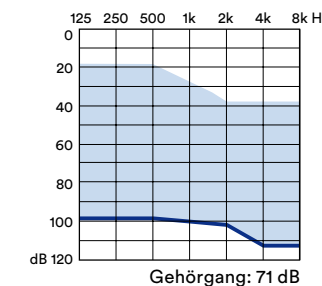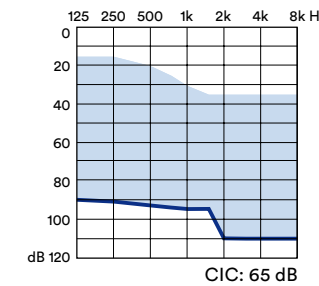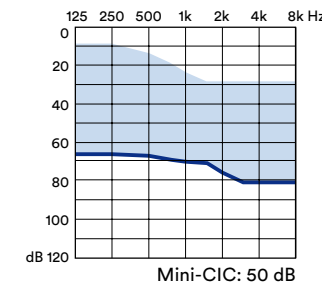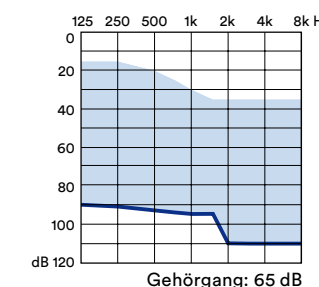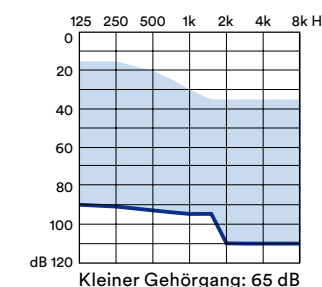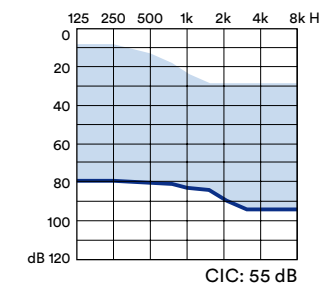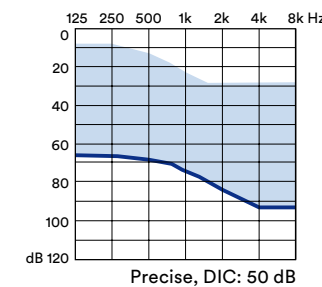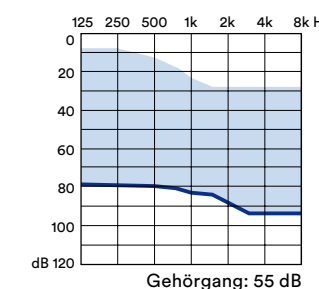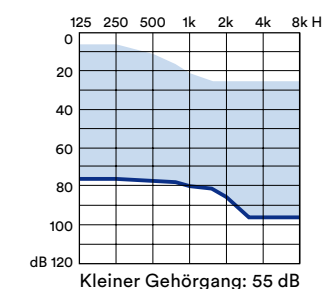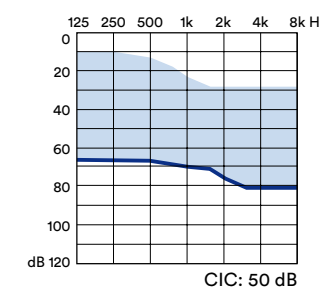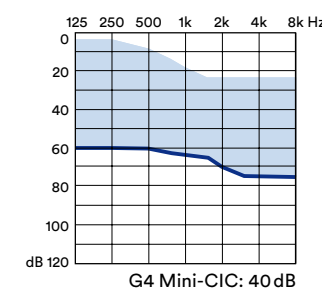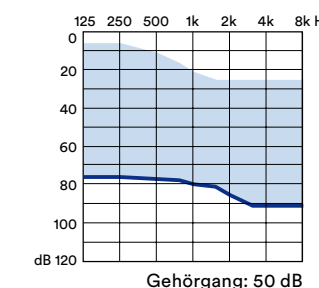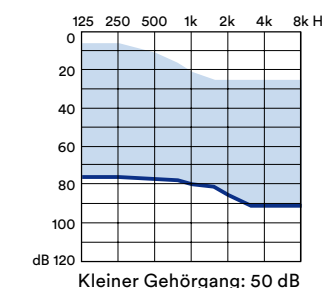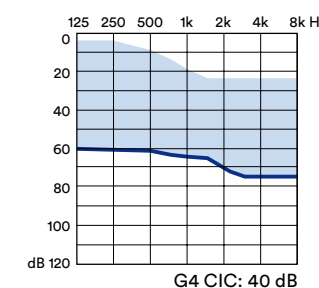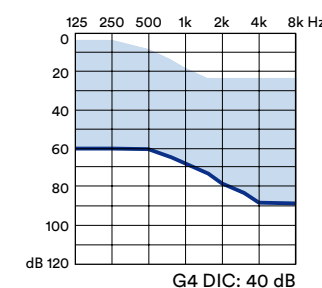

Alle Messungen mit 2 ccm Kuppler wurden (falls zutreffend) gemäß ANSI S3.22-2014 und IEC 60118-0:2015 durchgeführt.

Das kleine
Icon G5/G4

Kleinstmögliche
Bauart

Das kleinste Im-Ohr-Modell von Audio Service ist die kosmetische Lösung für Ihre Kunden, die größtmögliche Unauffälligkeit wünschen. Beim ultra-kleinen Icon G5 Precise merkt man dank des neuen kleineren Mikrofons und der dünneren Schale deutlich den Unterschied.

Besondere Merkmale

- › Bis zu Vmax = 55 dB / LAmax = ??? dB
- › Custom-made
- › Bauform: DIC bis Mini-CIC
- › Wireless-Funktionalität bei Mini-CIC möglich
- › NEU: Icon Precise – kleinstmögliche Bauart mit kleinerem Mikrofon und dünnerer Schale

Zubehör



Apps



Bedienoption

- › Programmierbarer Taster bei Icon Mini-CIC

Batterie

- › 10er Batterie



Tech Level
16 | 12 | 8



Tech Level
16 | 12 | 8 | 6 | 4 | 3

Icon G5 Precise



Icon G5/Icon G4 DIC



Icon G4 Mini-CIC mit serienmäßigem Programmwahltaster im Batteriefachdeckel

Originalgröße



Farben

	Skin	Braun ¹⁾³⁾	Rot	Blau	Weiß ⁶⁾	Schwarz ⁶⁾	Transparent	Zitrus	Smaragd	Orange	Purpur	Mokka ²⁾	Beige ⁴⁾	Dunkelbraun ⁶⁾
Schale:														
Faceplate:														

1) Standard Faceplate bei Modell ohne Taster 2) Standard Faceplate bei Mini-CIC mit Taster 3) Standard Schale 4) Nur Faceplate ohne Taster 5) Nur in TL 16 erhältlich 6) Schale Icon G5 Precise

Icon

G5

G4

Tech Level

Technikausstattung

	16	12	8
Signalverarbeitungskanäle	48	34	34
Frequenzkanäle	20	16	12
AGC-Kanäle	20	16	12
MPO-Kanäle	20	16	12
Hörprogramme	6	6	6
– MusicSelect / Anzahl Hörprogramme	3	1	-
– EchoClear / Enthallung	•	-	-
– ZearPhone	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾
Telefonspule	-	-	-
Data Logging	•	•	•
Wireless			
– AudioLink	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾
– Binaurale Synchronisation	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾
– Wireless Audio Streaming (Bluetooth®-Fernbedienung)	-	-	-
– CROS / BiCROS	• ²⁾	• ²⁾	• ²⁾

Automatikfunktionen

Occlumatic	-	-	-
Comfort365	•	•	•
Intelligente Acclimatic	•	•	-
Acclimatic	-	-	•
Comformatic	•	•	•

Signalverarbeitung

Anti-Feedback-System	•	•	•
Störschallmanager			
– Adaptive Störschallreduzierung	•	•	•
– Wiener Filter	•	•	•
– Binaurale Windgeräuschreduzierung	-	-	-
– Adaptive Windgeräuschreduzierung	•	•	•
– Impulsunterdrücker	•	•	•
– Situationsautomatik	•	•	•
– Selectronic	-	-	-
AudioTronic 1 Mic	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾
AudioTronic Multimikrofonsystem			
– Panorama	-	-	-
– Direktional statisch	-	-	-
– Automatisch	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾
– Adaptiv	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾
– AudioFocus 360	-	-	-
– Sprache 360	-	-	-
– AudioDirSelect	-	-	-
– SpatialSpot	-	-	-
– AudioSpot	-	-	-

Frequenz- und Dynamikkonzept

– Erweiterte Eingangsdynamik	•	•	•
– TRC S	•	•	•
– Selektive Frequenzkompression	•	•	•
– HiFi-Funktionalität / Sound Upgrade	•	•	-
– Umgebungsabhängige Lautstärkeanpassung	-	-	-
Programmierbare Tinnitus-Funktion	• ⁴⁾	• ⁴⁾	• ⁴⁾

Apps

Smart Direct App (inkl. Hörumgebungsprofil)	-	-	-
Smart Connect App	-	-	-
Smart Remote App	•	•	•

• Serienausstattung • optional möglich 1) Gültig für Mini-CIC mit Wireless-Funktionalität 2) CROS quiX/CROS RIC und Wireless-Funktionalität benötigt 3) Nur in Betriebsart Wireless Audio Streaming 4) Unterstützung der Tinnitus Notch-Therapie

Das beliebte Sina G5/G4

Bewährte Bauform, neueste Technik

Die beliebteste IdO-Bauform gibt es jetzt auch mit G5-Technologie. Dieses Hörsystem bietet ein angenehmes Klangerlebnis mit großem Hörkomfort und hoher Verstärkungsleistung.

Besondere Merkmale

- › Bis zu Vmax = 71 dB / LAmax = 131 dB
- › Wireless-Funktionalität bis 65 dB möglich
- › Semimodular
- › Bauform: CIC

Zubehör



Apps



Bedienoption

- › Programmierbarer Taster

Batterie

- › 10er Batterie



Originalgröße



Tech Level
16 | 12 | 8



Tech Level
16 | 12 | 8 | 6 | 4 | 3



Farben

	Skin ¹⁾	Braun	Rot	Blau	Weiß ²⁾	Schwarz ²⁾	Transparent	Zitrus	Smaragd	Orange	Purpur	Beauty
Schale:												
Faceplate:												

1) Standard 2) nur in TL 16 erhältlich

Sina

G5

G4

Tech Level

Technikausstattung

	16	12	8	16	12	8	6	4	3
	Neu	Neu	Neu						
Signalverarbeitungskanäle	48	34	34	40	32	24	16	16	12
Frequenzkanäle	20	16	12	20	16	12	8	8	6
AGC-Kanäle	20	16	12	20	16	12	8	8	6
MPO-Kanäle	20	16	12	20	16	12	8	8	6
Hörprogramme	6	6	6	6	6	6	4	4	4
– MusicSelect / Anzahl Hörprogramme	3	1	-	3	1	1	-	-	-
– EchoClear / Enthallung	•	-	-	•	-	-	-	-	-
– ZearPhone	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	-	-	-	-	-	-
Telefonspule	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data Logging	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wireless									
– AudioLink	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	-	-	-
– Binaurale Synchronisation	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	-
– Wireless Audio Streaming (Bluetooth®-Fernbedienung)	-	-	-	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	-
– CROS / BiCROS	• ²⁾	• ²⁾	• ²⁾	• ²⁾	• ²⁾	• ²⁾	-	-	-

Automatikfunktionen

Occlumatic	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comfort365	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Intelligente Acclimatic	•	•	-	•	•	-	-	-	-
Acclimatic	-	-	•	-	-	•	•	•	-
Comformatic	•	•	•	•	•	•	-	-	-

Signalverarbeitung

Anti-Feedback-System	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Störschallmanager									
– Adaptive Störschallreduzierung	•	•	•	•	•	•	•	• (an/aus)	• (an/aus)
– Wiener Filter	•	•	•	•	•	•	•	• (an/aus)	• (an/aus)
– Binaurale Windgeräuschreduzierung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– Adaptive Windgeräuschreduzierung	•	•	•	•	•	•	•	-	-
– Impulsunterdrücker	•	•	•	•	•	•	•	-	-
– Situationsautomatik	•	•	•	•	•	•	-	-	-
– Selectronic	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AudioTronic 1 Mic	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	-	-	-	-	-
AudioTronic Multimikrofonsystem									
– Panorama	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– Direktional statisch	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– Automatisch	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	-	-	-	-	-
– Adaptiv	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	-	-	-	-	-
– AudioFocus 360	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– Sprache 360	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– AudioDirSelect	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– SpatialSpot	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– AudioSpot	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frequenz- und Dynamikkonzept									
– Erweiterte Eingangsdynamik	•	•	•	-	-	-	-	-	-
– TRC S	•	•	•	•	•	•	•	•	•
– Selektive Frequenzkompression	•	•	•	•	•	•	•	•	-
– HiFi-Funktionalität / Sound Upgrade	•	•	-	•	•	-	-	-	-
– Umgebungsabhängige Lautstärkeanpassung	-	-	-	• ³⁾	-	-	-	-	-
Programmierbare Tinnitus-Funktion	• ⁴⁾	• ⁴⁾	• ⁴⁾	•	•	•	•	-	-

Apps

Smart Direct App (inkl. Hörumgebungsprofil)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Smart Connect App	-	-	-	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	-
Smart Remote App	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Serienausstattung • optional möglich ¹⁾ Gültig für Modelle mit Wireless-Funktionalität ²⁾ CROS quiX/CROS RIC und Wireless-Funktionalität benötigt ³⁾ Nur in Betriebsart Wireless Audio Streaming ⁴⁾ Unterstützung der Tinnitus Notch-Therapie

Das variable Vega G4

Modern und komfortabel

Das leistungsstarke Modell mit programmierbarem Taster.

Besondere Merkmale

- › Vega G4: bis zu Vmax = 71 dB / LAmix = 131 dB
- › Wireless-Funktionalität bis 65 dB möglich
- › Semimodular
- › Bauform: Gehörgang

Zubehör



Apps



Bedienoption

- › Programmierbarer Taster

Batterie

- › 312er Batterie



Originalgröße



Tech Level
16 | 12 | 8 | 6 | 4 | 3



Farben

	Skin ¹⁾	Rot	Blau	Weiß ²⁾	Schwarz ²⁾	Transparent	Zitrus	Smaragd	Orange	Purpur	Beauty
Schale:											
Faceplate:											

1) Standard 2) nur in TL 16 erhältlich

Vega

G4

Tech Level

Technikausstattung

	16	12	8	6	4	3
Signalverarbeitungskanäle	40	32	24	16	16	12
Frequenzkanäle	20	16	12	8	8	6
AGC-Kanäle	20	16	12	8	8	6
MPO-Kanäle	20	16	12	8	8	6
Hörprogramme	6	6	6	4	4	4
– MusicSelect / Anzahl Hörprogramme	3	1	1	-	-	-
– EchoClear / Enthüllung	•	-	-	-	-	-
– ZearPhone	-	-	-	-	-	-
Telefonspule	-	-	-	-	-	-
Data Logging	•	•	•	•	•	•
Wireless						
– AudioLink	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	-	-	-
– Binaurale Synchronisation	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	-
– Wireless Audio Streaming (Bluetooth®-Fernbedienung)	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	-
– CROS / BiCROS	• ²⁾	• ²⁾	• ²⁾	-	-	-

Automatikfunktionen

Comfort365	•	•	•	•	•	-
Intelligente Acclimatic	•	•	-	-	-	-
Acclimatic	-	-	•	•	•	-
Comformatic	•	•	•	-	-	-

Signalverarbeitung

Anti-Feedback-System	•	•	•	•	•	•
Störschallmanager						
– Adaptive Störschallreduzierung	•	•	•	•	•(an/aus)	•(an/aus)
– Wiener Filter	•	•	•	•	•(an/aus)	•(an/aus)
– Binaurale Windgeräuschreduzierung	-	-	-	-	-	-
– Adaptive Windgeräuschreduzierung	•	•	•	•	-	-
– Impulsunterdrücker	•	•	•	•	-	-
– Situationsautomatik	•	•	•	-	-	-
– Selectronic	-	-	-	-	-	-
AudioTronic 1 Mic	• ¹⁾	-	-	-	-	-
AudioTronic Multimikrofonsystem						
– Panorama	-	-	-	-	-	-
– Direktional statisch	-	-	-	-	-	-
– Automatisch	• ¹⁾	-	-	-	-	-
– Adaptiv	• ¹⁾	-	-	-	-	-
– AudioFocus 360	-	-	-	-	-	-
– Sprache 360	-	-	-	-	-	-
– AudioDirSelect	-	-	-	-	-	-
– AudioSpot	-	-	-	-	-	-
Frequenz- und Dynamikkonzept						
– TRC S	•	•	•	•	•	•
– Selektive Frequenzkompression	•	•	•	•	•	-
– HiFi-Funktionalität / Sound Upgrade	•	•	-	-	-	-
– Umgebungsabhängige Lautstärkeanpassung	• ³⁾	-	-	-	-	-
Programmierbare Tinnitus-Funktion	•	•	•	•	-	-

Apps

Smart Connect App	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	-
Smart Remote App	•	•	•	•	•	•

• Serienausstattung • optional möglich 1) Gültig für Modelle mit Wireless-Funktionalität 2) CROS RIC und Wireless-Funktionalität benötigt 3) Nur in Betriebsart Wireless Audio Streaming

Das vielseitige
Ida BT G5/Ida G4

Revolutionär und
funktional

Das Ida BT G5 ist das erste Audio Service IdO-
Hörsystem mit Direct Audio Streaming Technologie
via Bluetooth und zudem serienmäßiger Wireless-
Funktionalität. Dadurch wird das Hörsystem zur
universell vernetzten Kommunikationszentrale im Ohr.

Besondere Merkmale

- › Ida: bis zu Vmax = 71 dB / LAmax = 131 dB
- › Wireless-Funktionalität bis 65 dB möglich
- › Bauform: Gehörgang bis Halbconcha
- › 2-Mic IdO
- › Ida BT G5: Direct Audio Streaming via *Bluetooth®*
- › Ida G4: Audio Streaming

Zubehör



Apps



Bedienoption

- › Programmtaster (Ida BT G5)
- › Programmierbarer
Wippschalter (Ida G4)

Batterie

- › 312er Batterie



Ida BT G5



Ida G4

Originalgröße



Tech Level
16 | 12 | 8



Tech Level
16 | 12 | 8 | 6 | 4

Farben

	Skin ¹⁾	Braun ¹⁾	Rot	Blau	Weiß ²⁾	Schwarz ²⁾	Transparent	Zitrus	Smaragd	Orange	Purpur	Beige ³⁾	Dunkelbraun ⁴⁾	Beauty ⁴⁾
Schale:														
Faceplate:														

1) Standard Schale und Standard Faceplate bei G4 2) nur in TL 16 erhältlich 3) Standard bei G5 4) nur bei G4 5) Faceplate nur bei G5 6) Faceplate nur bei G5

Ida

BT G5 G4

Tech Level

Technikausstattung

	16 Neu	12 Neu	8 Neu	16	12	8	6	4
Signalverarbeitungskanäle	48	34	34	40	32	24	16	16
Frequenzkanäle	20	16	12	20	16	12	8	8
AGC-Kanäle	20	16	12	20	16	12	8	8
MPO-Kanäle	20	16	12	20	16	12	8	8
Hörprogramme	6	6	6	6	6	6	4	4
– MusicSelect / Anzahl Hörprogramme	3	1	-	3	1	1	-	-
– EchoClear / Enthallung	•	-	-	•	-	-	-	-
– 2earPhone	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	-	-
Telefonspule	-	-	-	-	-	-	-	-
Data Logging	•	•	•	•	•	•	•	•
Wireless								
– AudioLink	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	-	-
– Binaurale Synchronisation	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾
– Direct Audio Streaming iPhone (Android ¹⁾)	•	•	•	-	-	-	-	-
– Wireless Audio Streaming (<i>Bluetooth®</i> -Fernbedienung)	-	-	-	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾
– CROS / BiCROS	• ²⁾	• ²⁾	• ²⁾	• ²⁾	• ²⁾	• ²⁾	-	-

Automatikfunktionen

Occlumatic	-	-	-	-	-	-	-	-
Comfort365	•	•	•	•	•	•	•	•
Intelligente Acclimatic	•	•	-	•	•	-	-	-
Acclimatic	-	-	•	-	-	•	•	•
Comformatic	•	•	•	•	•	•	-	-

Signalverarbeitung

Anti-Feedback-System	•	•	•	•	•	•	•	•
Störschallmanager								
– Adaptive Störschallreduzierung	•	•	•	•	•	•	•	• (an/aus)
– Wiener Filter	•	•	•	•	•	•	•	• (an/aus)
– Binaurale Windgeräuschreduzierung	■ ■	■	-	■ ■	■ ■	-	-	-
– Adaptive Windgeräuschreduzierung	-	-	•	-	-	•	•	-
– Impulsunterdrücker	•	•	•	•	•	•	•	-
– Situationsautomatik	•	•	•	•	•	•	-	-
– MotionSense	•	•	-	-	-	-	-	-
– Selectronic	•	•	-	•	•	-	-	-
AudioTronic 1 Mic	-	-	-	-	-	-	-	-
AudioTronic Multimikrofonsystem								
– Panorama	-	-	-	-	-	-	-	-
– Direktional statisch	•	•	•	•	•	•	•	•
– Automatisch	•	•	•	•	•	•	•	•
– Adaptiv	•	•	•	•	•	•	•	-
– AudioFocus 360	•	-	-	•	-	-	-	-
– Sprache 360	-	•	-	-	•	-	-	-
– AudioDirSelect	•	•	-	•	•	-	-	-
– SpatialSpot	•	-	-	-	-	-	-	-
– AudioSpot	-	■ ■	■	■ ■ ■	■ ■	■	-	-
Frequenz- und Dynamikkonzept								
– Erweiterte Eingangsdynamik	•	•	•	-	-	-	-	-
– TRC S	•	•	•	•	•	•	•	•
– Selektive Frequenzkompression	•	•	•	•	•	•	•	•
– HiFi-Funktionalität / Sound Upgrade	•	-	-	•	•	-	-	-
– Umgebungsabhängige Lautstärkeanpassung	• ³⁾	• ³⁾	• ³⁾	• ³⁾	-	-	-	-
Programmierbare Tinnitus-Funktion	• ⁴⁾	• ⁴⁾	• ⁴⁾	•	•	•	•	-

Apps

Smart Direct App (inkl. Hörumgebungsprofil)	•	•	•	-	-	-	-	-
Smart Connect App	-	-	-	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	-
Smart Remote App	-	-	-	•	•	•	•	•

• Serienausstattung • optional möglich ■ Intensitätsgrad 1) Gültig für Modelle mit Wireless-Funktionalität 2) CROS RIC und Wireless-Funktionalität benötigt 3) Nur in Betriebsart Wireless Audio Streaming

Die RIC-Systeme in der Übersicht

Die RIC-Modelle bieten alle Vorteile des externen Hörers gepaart mit anspruchsvoller Signalverarbeitung. Umfangreiches Zubehör und die Bedienung über Apps komplettieren das Angebot.

Die neue Generation G5 bietet darüber hinaus im Mood und Sun unter anderem Direct Audio Streaming, Occlumatic und die drahtlose Programmierung via NoahLink Wireless.

Alle G5- und G4-RIC-Hörsysteme (außer quiX) sind mindestens IP67-zertifiziert.





Das neue Mood Li-Ion paart in einzigartiger Weise Streaming, modernste Li-Ion-Akku-technologie und Occlumatic.

quiX






Batterie 10 / 312

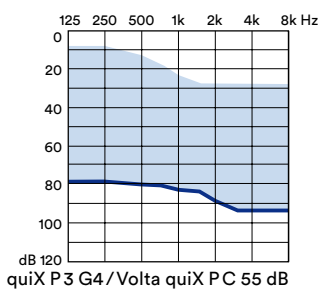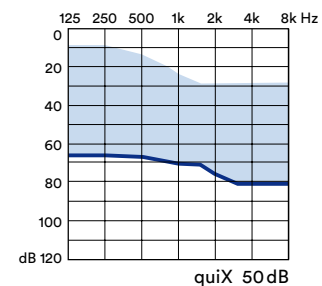

Rixx






10

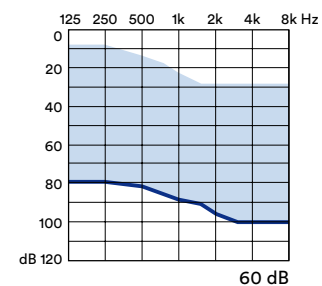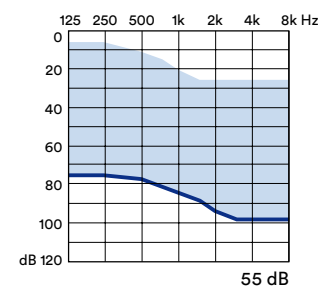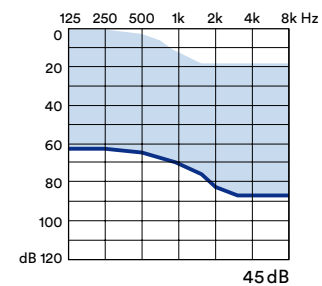

Mood






312 / Akku

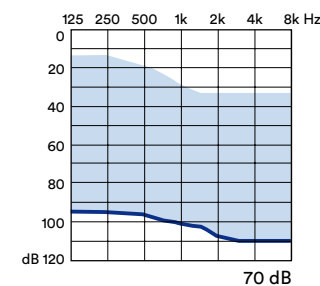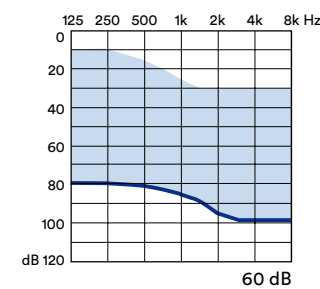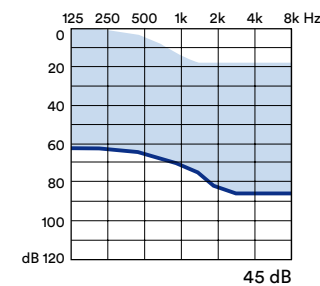

Mood Li-Ion






Akku (Li-Ion)

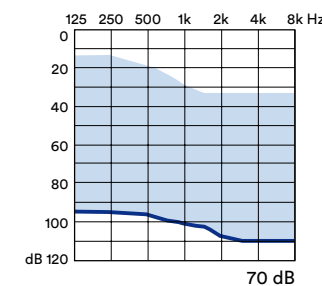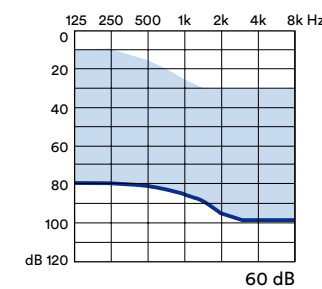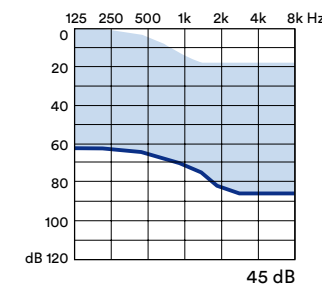

Sun






13 / Akku

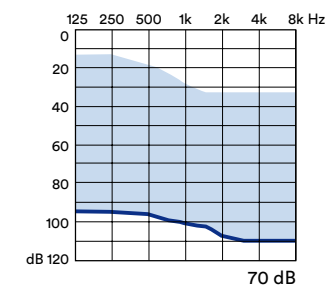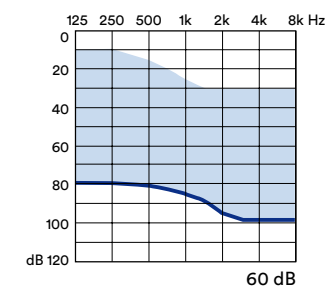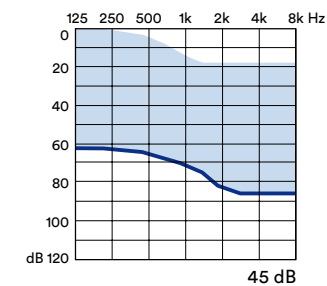

Sun Li-Ion



Akku (Li-Ion)

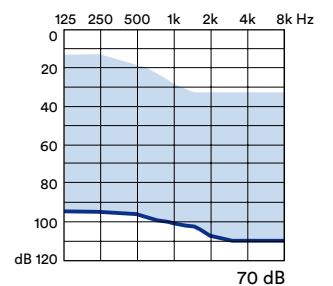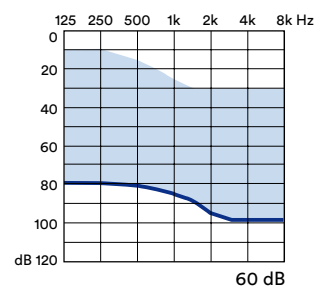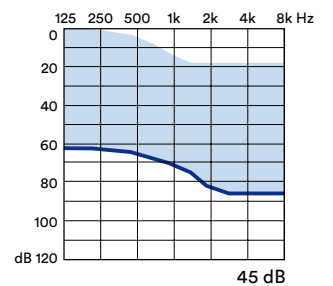

Das unvergleichliche quiX G5

Die G5-Alternative zum RIC für die Sofortanpassung

Das quiX G5 ist nicht nur mit der G5-Technologie ausgestattet, sondern auch kleiner als das Vorgängermodell. Durch die serienmäßige Wireless-Ausstattung schafft es entspannte Hörerlebnisse.

Besondere Merkmale

- › Bis zu Vmax = 50 dB / LAmix = 113 dB
- › Neu: kleinere Bauform
- › Serienmäßig Wireless
- › Instant-Fit, doch klein wie ein IdO

Zubehör



Apps



Bedienoption

- › Vollautomatisch

Batterie

- › 10er Batterie



quiX G5

Originalgröße



Tech Level
16 | 12 | 8



Farben

Rot Blau Mokka Schwarz

Schale:  

Faceplate:  

quiX

G5

Tech Level

16	12	8
Neu	Neu	Neu

Technikausstattung

Signalverarbeitungskanäle	48	34	34
Frequenzkanäle	20	16	12
AGC-Kanäle	20	16	12
MPO-Kanäle	20	16	12
Hörprogramme	6	6	6
– MusicSelect / Anzahl Hörprogramme	3	1	-
– EchoClear / Enthüllung	•	-	-
– 2earPhone	•	•	•
Telefonspule	-	-	-
Data Logging	•	•	•
Wireless			
– AudioLink	•	•	•
– Binaurale Synchronisation	•	•	•
– Wireless Audio Streaming	-	-	-
– CROS / BiCROS	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾

Automatikfunktionen

Occlumatic	-	-	-
Comfort365	•	•	•
Intelligente Acclimatic	•	•	-
Acclimatic	-	-	•
Comformatic	•	•	•

Signalverarbeitung

Anti-Feedback-System	•	•	•
Störschallmanager			
– Adaptive Störschallreduzierung	•	•	•
– Wiener Filter	•	•	•
– Binaurale Windgeräuschreduzierung	-	-	-
– Adaptive Windgeräuschreduzierung	•	•	•
– Impulsunterdrücker	•	•	•
– Situationsautomatik	•	•	•
– MotionSense	-	-	-
– Selectronic	-	-	-
AudioTronic Multimikrofonsystem (AudioTronic 1 Mic)	•	•	•
– Panorama	-	-	-
– Direktional statisch	-	-	-
– Automatisch	•	•	•
– Adaptiv	•	•	•
– AudioFocus 360	-	-	-
– Sprache 360	-	-	-
– AudioDirSelect	-	-	-
– SpatialSpot	-	-	-
– AudioSpot	-	-	-

Frequenz- und Dynamikkonzept

– Erweiterte Eingangsdynamik	•	•	•
– TRC S	•	•	•
– Selektive Frequenzkompression	•	•	•
– HiFi-Funktionalität / Sound Upgrade	•	-	-
– Umgebungsabhängige Lautstärkeanpassung	-	-	-
Programmierbare Tinnitus-Funktion	• ²⁾	• ²⁾	• ²⁾

Apps

Smart Direct App (inkl. Hörumgebungsprofil)	-	-	-
Smart Connect App	-	-	-
Smart Remote App	•	•	•

• Serienausstattung • optional möglich 1) CROS quiX G5 benötigt 2) Unterstützung der Tinnitus Notch-Therapie

Das unkomplizierte
quiX G4

Die G4-Alternative zum RIC
für die Sofortanpassung

Die Schalenform von quiX folgt der natürlichen Gehör-
ganggeometrie und endet im Clic Ball, der sicheren
Rastverbindung zwischen quiX und Dome, Click Sleeve
oder quiX MOULD. Es ist die ideale Alternative zu einem
RIC-Hörsystem.

Besondere Merkmale

- › quiX G4: bis zu Vmax = 50 dB / LAmix = 113 dB
- › quiX P 3 / quiX Volta P C: bis zu Vmax = 55 dB / LAmix = 116 dB
- › Serienmäßig Wireless (TL 4 – 16)
- › Programmierung mit Flex-Connect

Zubehör



Apps



Bedienoption

- › Vollautomatisch (TL 3 – 16)
- › Programmwahltaster
(P 3/Basis)

Batterie

- › 10er Batterie (TL 3 – 16)
- › 312er Batterie (P 3/Basis)



Tech Level
16 | 12 | 8 | 6 | 4 | 3

Basis



quiX G4 (TL 4 – 16)



quiX 3 G4



quiX P 3 G4
Volta quiX P C

Originalgröße



Farben	quiX G4 (TL 4 – 16)			quiX 3 G4 / quiX P 3 G4 / Volta quiX P C	
	Rot	Blau	Mokka	Beige	Mokka
Schale:					
Faceplate:					

quiX

G4

Tech Level

Technikausstattung

	16	12	8	6	4	3	P3	Basis ³⁾
Signalverarbeitungskanäle	40	32	24	16	16	12	12	8
Frequenzkanäle	20	16	12	8	8	6	6	4
AGC-Kanäle	20	16	12	8	8	6	6	4
MPO-Kanäle	20	16	12	8	8	6	6	4
Hörprogramme	6	6	6	4	4	4	4	4
– MusicSelect / Anzahl Hörprogramme	3	1	1	-	-	-	-	-
– EchoClear / Enthüllung	•	-	-	-	-	-	-	-
– 2earPhone	-	-	-	-	-	-	-	-
Telefonspule	-	-	-	-	-	-	-	-
Data Logging	•	•	•	•	•	•	•	•
Wireless								
– AudioLink	•	•	•	-	-	-	-	-
– Binaurale Synchronisation	•	•	•	•	•	-	-	-
– Wireless Audio Streaming (Bluetooth®-Fernbedienung)	•	•	•	•	•	-	-	-
– CROS / BiCROS	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	-	-	-	-	-

Automatikfunktionen

Comfort365	•	•	•	•	•	-	-	-
Intelligente Acclimatic	•	•	-	-	-	-	-	-
Acclimatic	-	-	•	•	•	-	-	-
Comformatic	•	•	•	-	-	-	-	-

Signalverarbeitung

Anti-Feedback-System	•	•	•	•	•	•	•	•
Störschallmanager								
– Adaptive Störschallreduzierung	•	•	•	•	•(an/aus)	•(an/aus)	•(an/aus)	•(an/aus)
– Wiener Filter	•	•	•	•	•(an/aus)	•(an/aus)	•(an/aus)	-
– Binaurale Windgeräuschreduzierung	-	-	-	-	-	-	-	-
– Adaptive Windgeräuschreduzierung	•	•	•	•	-	-	-	-
– Impulsunterdrücker	•	•	•	•	-	-	-	-
– Situationsautomatik	•	•	•	-	-	-	-	-
– Selectronic	-	-	-	-	-	-	-	-
AudioTronic 1 Mic	•	-	-	-	-	-	-	-
AudioTronic Multimikrofonsystem								
– Panorama	-	-	-	-	-	-	-	-
– Direktional statisch	-	-	-	-	-	-	-	-
– Automatisch	•	-	-	-	-	-	-	-
– Adaptiv	•	-	-	-	-	-	-	-
– AudioFocus 360	-	-	-	-	-	-	-	-
– Sprache 360	-	-	-	-	-	-	-	-
– AudioDirSelect	-	-	-	-	-	-	-	-
– AudioSpot	-	-	-	-	-	-	-	-
Frequenz- und Dynamikkonzept								
– TRC S	•	•	•	•	•	•	•	•
– Selektive Frequenzkompression	•	•	•	•	•	-	-	-
– HiFi-Funktionalität / Sound Upgrade	•	•	-	-	-	-	-	-
– Umgebungsabhängige Lautstärkeanpassung	• ²⁾	-	-	-	-	-	-	-
Programmierbare Tinnitus-Funktion	•	•	•	•	-	-	-	-

Apps

Smart Connect App	•	•	•	•	•	-	-	-
Smart Remote App	•	•	•	•	•	•	•	•

• Serienausstattung • optional möglich 1) CROS RIC benötigt 2) Nur in Betriebsart Wireless Audio Streaming 3) Volta quiX P C

Das elegante
Rixx G5/G4

Zierlich und
unauffällig

Die Rixx Hörsysteme sind mit vielen Automatikfunktionen ausgestattet, die für ausgezeichneten Hörkomfort sorgen. Sie stellen sich flexibel auf die jeweilige Hörsituation ein. Je nach individuellen Vorlieben kann Rixx aber auch manuell per Taster oder Smartphone bedient werden.

Besondere Merkmale

- › Bis zu Vmax = 60 dB / LAmix = 118 dB
- › Das kleinste Audio Service RIC-Hörsystem
- › Vollautomatisch
- › Ausgezeichnetes Design – ergonomisch geformt

Zubehör



Apps



Bedienoption

- › Programmierbarer Taster

Batterie

- › 10er Batterie



Tech Level
16 | 12 | 8



Tech Level
16 | 12 | 8 | 6 | 4



Originalgröße



Farben

	Dunkelblond ¹⁾	Dunkles Granit	Perlweiß ¹⁾	Silber	Granit ¹⁾	Braun ²⁾	Grau	Beige	Dunkelbraun ³⁾
Gehäuse:									

1) Farbe in den Tech Leveln 6 und 4 nur im tune Konzept erhältlich 2) Nur G4 3) Nur G5

Rixx

G5

G4

Tech Level

Technikausstattung

	16	12	8	16	12	8	6	4
	Neu	Neu	Neu					
Signalverarbeitungskanäle	48	34	34	40	32	24	16	16
Frequenzkanäle	20	16	12	20	16	12	8	8
AGC-Kanäle	20	16	12	20	16	12	8	8
MPO-Kanäle	20	16	12	20	16	12	8	8
Hörprogramme	6	6	6	6	6	6	4	4
– MusicSelect / Anzahl Hörprogramme	3	1	-	3	1	1	-	-
– EchoClear / Enthallung	•	-	-	•	-	-	-	-
– 2earPhone	-	-	-	-	-	-	-	-
Telefonspule	-	-	-	-	-	-	-	-
Data Logging	•	•	•	•	•	•	•	•
Wireless								
– AudioLink	-	-	-	-	-	-	-	-
– Binaurale Synchronisation	-	-	-	-	-	-	-	-
– Direct Audio Streaming iPhone (Android ³⁾)	-	-	-	-	-	-	-	-
– CROS / BiCROS	-	-	-	-	-	-	-	-

Automatikfunktionen

Occlumatik	-	-	-	-	-	-	-	-
Comfort365	•	•	•	•	•	•	•	•
Intelligente Acclimatic	•	•	-	•	•	-	-	-
Acclimatic	-	-	•	-	-	•	•	•
Comformatic	•	•	•	•	•	•	-	-

Signalverarbeitung

Anti-Feedback-System	•	•	•	•	•	•	•	•
Störschallmanager								
– Adaptive Störschallreduzierung	•	•	•	•	•	•	•	• (an/aus)
– Wiener Filter	•	•	•	•	•	•	•	• (an/aus)
– Binaurale Windgeräuschreduzierung	-	-	-	-	-	-	-	-
– Adaptive Windgeräuschreduzierung	•	•	•	•	•	•	•	-
– Impulsunterdrücker	•	•	•	•	•	•	•	-
– Situationsautomatik	•	•	•	•	•	•	-	-
– MotionSense	-	-	-	-	-	-	-	-
– Selectronic	•	•	-	•	•	-	-	-
AudioTronic Multimikrofonsystem								
– Panorama	•	•	•	•	•	•	-	-
– Direktional statisch	•	•	•	•	•	•	•	•
– Automatisch	•	•	•	•	•	•	•	•
– Adaptiv	•	•	•	•	•	•	•	-
– AudioFocus 360	-	-	-	-	-	-	-	-
– Sprache 360	•	•	-	•	•	-	-	-
– AudioDirSelect	-	-	-	-	-	-	-	-
– SpatialSpot	-	-	-	-	-	-	-	-
– AudioSpot	-	-	-	-	-	-	-	-
Frequenz- und Dynamikkonzept								
– Erweiterte Eingangsdynamik	•	•	•	-	-	-	-	-
– TRC S	•	•	•	•	•	•	•	•
– Selektive Frequenzkompression	•	•	•	•	•	•	•	•
– HiFi-Funktionalität / Sound Upgrade	•	-	-	•	-	-	-	-
– Umgebungsabhängige Lautstärkeanpassung	-	-	-	-	-	-	-	-
Programmierbare Tinnitus-Funktion	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	•	•	•	•	-

Apps

Smart Direct App (inkl. Hörumgebungsprofil)	-	-	-	-	-	-	-	-
Smart Connect App	-	-	-	-	-	-	-	-
Smart Remote App	•	•	•	•	•	•	•	•

• Serienausstattung • optional möglich ¹⁾ Unterstützung der Tinnitus Notch-Therapie

Das dezente Mood G5/G4

Das Multitalent für höchste Ansprüche

Das vielseitig einsetzbare Mood ist ein kleines, unauffälliges Hörsystem. Dank unterschiedlicher Hörertypen kann es für ein breites Spektrum an Hörverlusten eingesetzt werden. Die Mood G4 Hörsysteme können in den Tech Leveln 8 – 16 alternativ mit Batterie oder Akku genutzt werden.

Besondere Merkmale

- › Bis zu Vmax = 70 dB / LMax = 124 dB
- › Smarte Verbindungsoptionen
- › Kleinste Bauform mit Wireless

Zubehör



Apps



Bedienoption

- › Programmierbarer Wippschalter

Batterie

- › 312er Batterie
- › Akku (G4 Tech Level 8 – 16)



Tech Level 16 | 12 | 8



Tech Level 16 | 12 | 8 | 6 | 4



Mood G5



Mood G4

Originalgröße



Farben

	Dunkelblond ¹⁾	Dunkles Granit	Perlweiß ¹⁾	Silber	Granit ¹⁾	Braun ²⁾	Grau	Beige	Dunkelbraun ³⁾
Gehäuse:									

1) Farbe in den Tech Leveln 6 und 4 nur im tune Konzept erhältlich 2) Nur G4 3) Nur G5

Mood

G5

G4

Tech Level

Technikausstattung

	16	12	8	16	12	8	6	4
Signalverarbeitungskanäle	48	34	34	40	32	24	16	16
Frequenzkanäle	20	16	12	20	16	12	8	8
AGC-Kanäle	20	16	12	20	16	12	8	8
MPO-Kanäle	20	16	12	20	16	12	8	8
Hörprogramme	6	6	6	6	6	6	4	4
– MusicSelect / Anzahl Hörprogramme	3	1	-	3	1	1	-	-
– EchoClear / Enthallung	•	-	-	•	-	-	-	-
– 2earPhone	•	•	•	•	•	•	-	-
Telefonspule	-	-	-	•	•	•	-	-
Data Logging	•	•	•	•	•	•	•	•
Wireless								
– AudioLink	•	•	•	•	•	•	-	-
– Binaurale Synchronisation	•	•	•	•	•	•	•	•
– Direct Audio Streaming iPhone (Android ¹⁾)	•	•	•	-	-	-	-	-
– Wireless Audio Streaming (Bluetooth®-Fernbedienung)	-	-	-	•	•	•	•	•
– CROS / BiCROS	• ²⁾	• ²⁾	• ²⁾	• ²⁾	• ²⁾	• ²⁾	-	-

Automatikfunktionen

Occlumatic	•	•	•	-	-	-	-	-
Comfort365	•	•	•	•	•	•	•	•
Intelligente Acclimatic	•	•	-	•	•	-	-	-
Acclimatic	-	-	•	-	-	•	•	•
Comformatic	•	•	•	•	•	•	-	-

Signalverarbeitung

Anti-Feedback-System	•	•	•	•	•	•	•	•
Störschallmanager								
– Adaptive Störschallreduzierung	•	•	•	•	•	•	•	• (an/aus)
– Wiener Filter	•	•	•	•	•	•	•	• (an/aus)
– Binaurale Windgeräuschreduzierung	■	■	-	■	■	-	-	-
– Adaptive Windgeräuschreduzierung	-	-	•	-	-	•	•	-
– Impulsunterdrücker	•	•	•	•	•	•	•	-
– Situationsautomatik	•	•	•	•	•	•	-	-
– MotionSense	•	•	-	-	-	-	-	-
– Selectronic	•	•	-	•	•	-	-	-
AudioTronic Multimikrofonsystem								
– Panorama	•	•	•	•	•	•	-	-
– Direktional statisch	•	•	•	•	•	•	•	•
– Automatisch	•	•	•	•	•	•	•	•
– Adaptiv	•	•	•	•	•	•	•	-
– AudioFocus 360	•	-	-	•	-	-	-	-
– Sprache 360	-	•	-	-	•	-	-	-
– AudioDirSelect	•	•	-	•	•	-	-	-
– SpatialSpot	•	-	-	-	-	-	-	-
– AudioSpot	-	■	■	■	■	■	-	-
Frequenz- und Dynamikkonzept								
– Erweiterte Eingangsdynamik	•	•	•	-	-	-	-	-
– TRC S	•	•	•	•	•	•	•	•
– Selektive Frequenzkompression	•	•	•	•	•	•	•	•
– HiFi-Funktionalität / Sound Upgrade	•	-	-	•	•	-	-	-
– Umgebungsabhängige Lautstärkeanpassung	• ³⁾	• ³⁾	• ³⁾	• ³⁾	-	-	-	-
Programmierung via NOAHlink WL (BLE)	•	•	•	-	-	-	-	-
Programmierbare Tinnitus-Funktion	• ⁴⁾	• ⁴⁾	• ⁴⁾	•	•	•	•	-

Apps

Smart Direct App (inkl. Hörumgebungsprofil)	•	•	•	-	-	-	-	-
Smart Connect App	-	-	-	•	•	•	•	•
Smart Remote App	-	-	-	•	•	•	•	•

• Serienausstattung • optional möglich ■ Intensitätsgrad 1) In Verbindung mit Zubehör Smart Mic 2) CROS RIC benötigt 3) Nur in Betriebsart Audio Streaming 4) Unterstützung der Tinnitus Notch-Therapie

Das einzigartige Mood Li-Ion G5

Eleganz und Komfort

Volle Konnektivität bei gleichzeitiger binauraler Datenverarbeitung, kombiniert mit Lithium-Ionen-Technologie. Das Mood Li-Ion G5 ist einzigartig und definiert einen neuen technischen Maßstab.

Besondere Merkmale

- › Bis zu Vmax = 70 dB / LAmax = 124 dB
- › Bis zu 19 Stunden Akkulaufzeit
- › Induktives Aufladen

Zubehör



Apps



Bedienoption

- › Programmierbarer Taster

Batterie

- › Lithium-Ionen-Akku



Tech Level
16 | 12 | 8

Originalgröße



Farben

	Dunkelblond	Dunkles Granit	Perlweiß	Silber	Granit	Grau	Beige	Dunkelbraun
Gehäuse:								

Mood Li-Ion G5

Tech Level

	16	12	8
	Neu	Neu	Neu

Technikausstattung

Signalverarbeitungskanäle	48	34	34
Frequenzkanäle	20	16	12
AGC-Kanäle	20	16	12
MPO-Kanäle	20	16	12
Hörprogramme	6	6	6
– MusicSelect / Anzahl Hörprogramme	3	1	-
– EchoClear / Enthallung	•	-	-
– 2earPhone	•	•	•
Telefonspule	-	-	-
Data Logging	•	•	•
Wireless			
– AudioLink	•	•	•
– Binaurale Synchronisation	•	•	•
– Direct Audio Streaming iPhone (Android 1)	•	•	•
– CROS / BiCROS	• ²⁾	• ²⁾	• ²⁾

Automatikfunktionen

Occlumatic	•	•	•
Comfort365	•	•	•
Intelligente Acclimatic	•	•	-
Acclimatic	-	-	•
Comformatic	•	•	•

Signalverarbeitung

Anti-Feedback-System	•	•	•
Störschallmanager			
– Adaptive Störschallreduzierung	•	•	•
– Wiener Filter	•	•	•
– Binaurale Windgeräuschreduzierung	■	■	-
– Adaptive Windgeräuschreduzierung	-	-	•
– Impulsunterdrücker	•	•	•
– Situationsautomatik	•	•	•
– MotionSense	•	•	-
– Selectronic	•	•	-
AudioTronic Multimikrofonsystem			
– Panorama	•	•	•
– Direktional statisch	•	•	•
– Automatisch	•	•	•
– Adaptiv	•	•	•
– AudioFocus 360	•	-	-
– Sprache 360	-	•	-
– AudioDirSelect	•	•	-
– SpatialSpot	•	-	-
– AudioSpot	-	■	■
Frequenz- und Dynamikkonzept			
– Erweiterte Eingangsdynamik	•	•	•
– TRC S	•	•	•
– Selektive Frequenzkompression	•	•	•
– HiFi-Funktionalität / Sound Upgrade	•	-	-
– Umgebungsabhängige Lautstärkeanpassung	• ³⁾	• ³⁾	• ³⁾
Programmierbare Tinnitus-Funktion	• ⁴⁾	• ⁴⁾	• ⁴⁾

Apps

Smart Direct App (inkl. Hörumgebungsprofil)	•	•	•
Smart Connect App	-	-	-
Smart Remote App	-	-	-

• Serienausstattung • optional möglich ■ Intensitätsgrad 1) In Verbindung mit Zubehör Smart Mic 2) CROS RIC G5 benötigt 3) Nur in Betriebsart Audio Streaming 4) Unterstützung der Tinnitus Notch-Therapie

Das komfortable
Sun G5/G4

Kompakte und intelligente
Premium-Lösungen

Das leistungsstarke Sun überzeugt durch seine Vielfältigkeit. In dem Designgehäuse steckt ein ausgesprochen leistungsfähiges Hörsystem. Die Sun G4 Hörsysteme können alternativ mit Batterie oder Akku genutzt werden.

Besondere Merkmale

- › Bis zu Vmax = 70 dB / LAmix = 124 dB
- › Große Energiereserve in kleinem Designgehäuse
- › Ideal für Streaming

Zubehör



Apps



Bedienoption

- › Programmierbarer Wippschalter

Batterie

- › 13er Batterie
- › Akku (G4)



Tech Level
16 | 12 | 8



Tech Level
16 | 12 | 8



Sun G5



Sun G4

Originalgröße

Farben

	Dunkelblond ¹⁾	Dunkles Granit	Perlweiß ¹⁾	Silber	Granit ¹⁾	Braun ²⁾	Grau	Beige	Dunkelbraun ³⁾
Gehäuse:									

1) Farbe in den Tech Leveln 6 und 4 nur im tune Konzept erhältlich 2) Nur G4 3) Nur G5

Sun

G5

G4

Tech Level

Technikausstattung

	16	12	8	16	12	8
Signalverarbeitungskanäle	48	34	34	40	32	24
Frequenzkanäle	20	16	12	20	16	12
AGC-Kanäle	20	16	12	20	16	12
MPO-Kanäle	20	16	12	20	16	12
Hörprogramme	6	6	6	6	6	6
– MusicSelect / Anzahl Hörprogramme	3	1	-	3	1	1
– EchoClear / Enthüllung	•	-	-	•	-	-
– 2earPhone	•	•	•	•	•	•
Telefonspule	•	•	•	•	•	•
Data Logging	•	•	•	•	•	•
Wireless						
– AudioLink	•	•	•	•	•	•
– Binaurale Synchronisation	•	•	•	•	•	•
– Direct Audio Streaming iPhone (Android ¹⁾)	•	•	•	-	-	-
– Wireless Audio Streaming (Bluetooth®-Fernbedienung)	-	-	-	•	•	•
– CROS / BiCROS	• ²⁾	• ²⁾	• ²⁾	• ²⁾	• ²⁾	• ²⁾

Automatikfunktionen

Occlumatic	•	•	•	-	-	-
Comfort365	•	•	•	•	•	•
Intelligente Acclimatic	•	•	-	•	•	-
Acclimatic	-	-	•	-	-	•
Comformatic	•	•	•	•	•	•

Signalverarbeitung

Anti-Feedback-System	•	•	•	•	•	•
Störschallmanager						
– Adaptive Störschallreduzierung	•	•	•	•	•	•
– Wiener Filter	•	•	•	•	•	•
– Binaurale Windgeräuschreduzierung	■	■	-	■	■	-
– Adaptive Windgeräuschreduzierung	-	-	•	-	-	•
– Impulsunterdrücker	•	•	•	•	•	•
– Situationsautomatik	•	•	•	•	•	•
– MotionSense	•	•	-	-	-	-
– Selectronic	•	•	-	•	•	-
AudioTronic Multimikrofonsystem						
– Panorama	•	•	•	•	•	•
– Direktional statisch	•	•	•	•	•	•
– Automatisch	•	•	•	•	•	•
– Adaptiv	•	•	•	•	•	•
– AudioFocus 360	•	-	-	•	-	-
– Sprache 360	-	•	-	-	•	-
– AudioDirSelect	•	•	-	•	•	-
– SpatialSpot	•	-	-	-	-	-
– AudioSpot	-	■	■	■	■	■
Frequenz- und Dynamikkonzept						
– Erweiterte Eingangsdynamik	•	•	•	-	-	-
– TRC S	•	•	•	•	•	•
– Selektive Frequenzkompression	•	•	•	•	•	•
– HiFi-Funktionalität / Sound Upgrade	•	-	-	•	•	-
– Umgebungsabhängige Lautstärkeanpassung	• ³⁾	• ³⁾	• ³⁾	• ³⁾	-	-
Programmierung via NOAHlink WL (BLE)	•	•	•	-	-	-
Programmierbare Tinnitus-Funktion	• ⁴⁾	• ⁴⁾	• ⁴⁾	•	•	•

Apps

Smart Direct App (inkl. Hörumgebungsprofil)	•	•	•	-	-	-
Smart Connect App	-	-	-	•	•	•
Smart Remote App	-	-	-	•	•	•

• Serienausstattung • optional möglich ■ Intensitätsgrad 1) In Verbindung mit Zubehör Smart Mic 2) CROS RIC benötigt 3) Nur in Betriebsart Audio Streaming 4) Unterstützung der Tinnitus Notch-Therapie

Das starke
Sun Li-Ion G4

Power und Ausdauer
für 24 Stunden

Das Sun Li-Ion G4 hat einen integrierten Lithium-Ionen-Akku, der in der Ladestation Smart Li-Ion Power induktiv aufgeladen wird. Der Akku bietet eine Betriebsdauer von 24 Stunden bei voller Konnektivität. Die Dauer für die vollständige Ladung beträgt 4 Stunden. Die 30-minütige Schnellladung sorgt für 7 Stunden Betriebszeit.

Besondere Merkmale

- › Bis zu Vmax = 70 dB / LAmix = 124 dB
- › Akkulaufzeit bis zu 24 Stunden mit unbegrenztem Streaming
- › Induktives Aufladen

Zubehör



Apps



Bedienoption

- › Programmierbarer Taster

Batterie

- › Lithium-Ionen-Akku



Tech Level
16 | 12 | 8 | 6

Originalgröße

Farben

	Dunkelblond ¹⁾	Dunkles Granit	Perlweiß ¹⁾	Silber	Granit ¹⁾	Braun	Grau	Beige
Gehäuse:								

1) Farbe im Tech Level 6 nur im tune Konzept erhältlich

Sun Li-Ion G4

Tech Level

Technikausstattung

	16	12	8	6
Signalverarbeitungskanäle	40	32	24	16
Frequenzkanäle	20	16	12	8
AGC-Kanäle	20	16	12	8
MPO-Kanäle	20	16	12	8
Hörprogramme	6	6	6	4
– MusicSelect / Anzahl Hörprogramme	3	1	1	-
– EchoClear / Enthüllung	•	-	-	-
– ZearPhone	•	•	•	-
Telefonspule	•	•	•	•
Data Logging	•	•	•	•
Wireless				
– AudioLink	•	•	•	-
– Binaurale Synchronisation	•	•	•	•
– Wireless Audio Streaming (Bluetooth®-Fernbedienung)	○	○	○	○
– CROS / BiCROS	○ ¹⁾	○ ¹⁾	○ ¹⁾	-

Automatikfunktionen

Comfort365	•	•	•	•
Intelligente Acclimatic	•	•	-	-
Acclimatic	-	-	•	•
Comformatic	•	•	•	-

Signalverarbeitung

Anti-Feedback-System	•	•	•	•
Störschallmanager				
– Adaptive Störschallreduzierung	•	•	•	•
– Wiener Filter	•	•	•	•
– Binaurale Windgeräuschreduzierung	■	■	-	-
– Adaptive Windgeräuschreduzierung	-	-	•	•
– Impulsunterdrücker	•	•	•	•
– Situationsautomatik	•	•	•	-
– Selectronic	•	•	-	-
AudioTronic Multimikrofonsystem				
– Panorama	•	•	•	-
– Direktional statisch	•	•	•	•
– Automatisch	•	•	•	•
– Adaptiv	•	•	•	•
– AudioFocus 360	•	-	-	-
– Sprache 360	-	•	-	-
– AudioDirSelect	•	•	-	-
– AudioSpot	■	■	■	-
Frequenz- und Dynamikkonzept				
– TRC S	•	•	•	•
– Selektive Frequenzkompression	•	•	•	•
– HiFi-Funktionalität / Sound Upgrade	•	•	-	-
– Umgebungsabhängige Lautstärkeanpassung	• ²⁾	-	-	-
Programmierbare Tinnitus-Funktion	•	•	•	•

Apps

Smart Connect App	○	○	○	○
Smart Remote App	○	○	○	○

• Serienausstattung ○ optional möglich ■ Intensitätsgrad 1) CROS RIC benötigt 2) Nur in Betriebsart Wireless Audio Streaming

HdO

Die HdO-Systeme in der Übersicht

Die große Auswahl an unterschiedlichen HdO-Modellen bietet für jeden Hörverlust das richtige Hörsystem. Die wahlweise offene oder geschlossene Anpassung sowie eine breite Farbpalette schaffen umfangreiche Möglichkeiten, auf die persönlichen Bedürfnisse des Kunden einzugehen. Das passende Zubehör vervollständigt den Komfort.

Alle HdO-Hörsysteme sind IP67-zertifiziert.



Wireless

Alle HdO-Hörsysteme der TL 4–16 haben Wireless-Funktionalität. Hierdurch steht eine Vielzahl an direktionalen Features und Vernetzungsmöglichkeiten mit anderen Audioquellen zur Verfügung.





Lithium-Ionen-Akku-Technologie

Das DUO Li-Ion G5 – unser erstes HdO mit Bluetooth®-Technologie und fortschrittlicher Lithium-Ionen-Technologie – erhalten Sie ab Februar 2019.

XS







Batterie 312

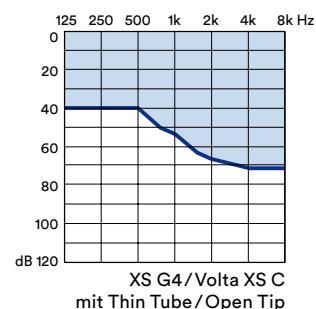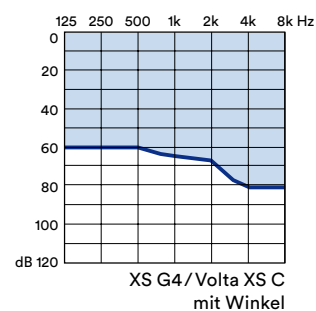

DUO



13

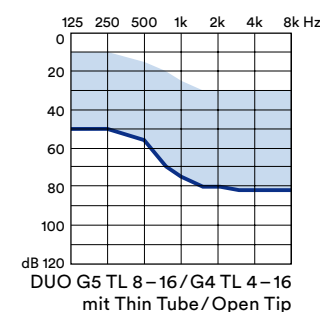
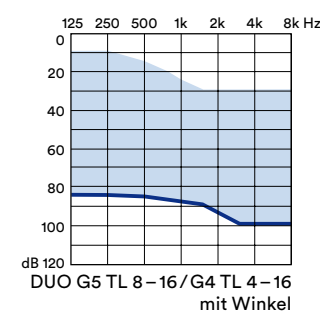
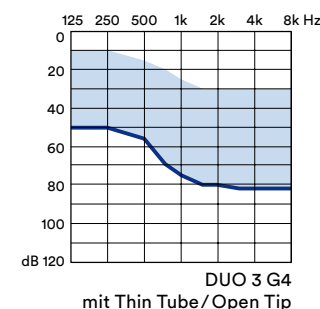
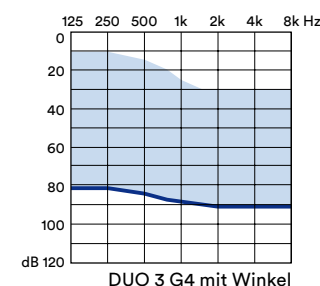


DUO Li-Ion



ab 2/2019





Akku

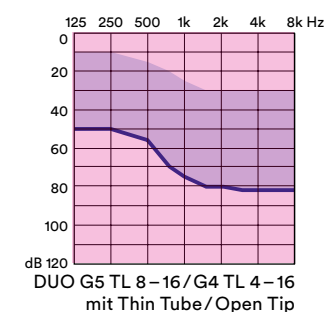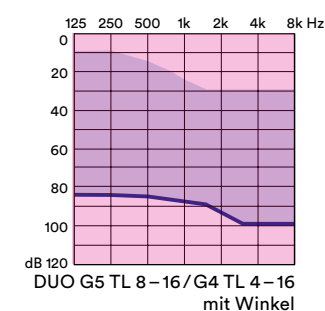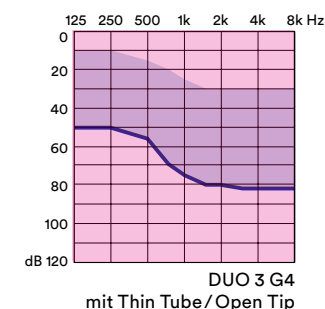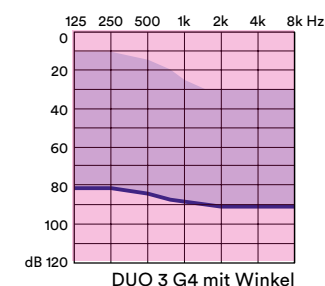

P




13

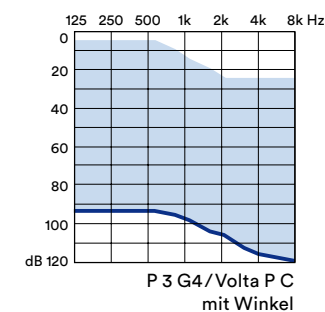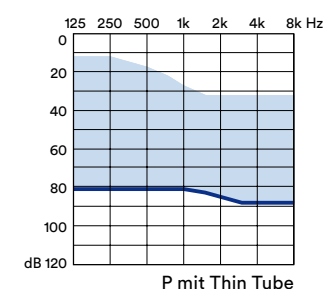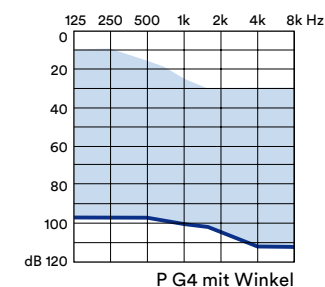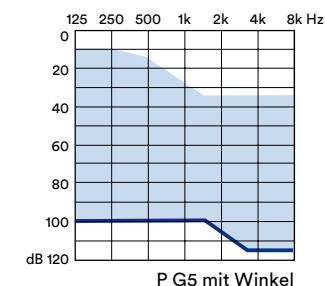

HP



675

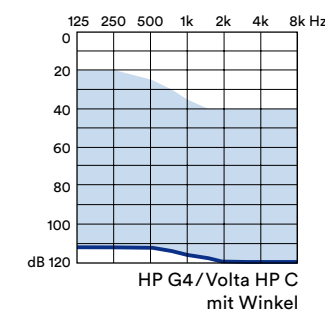

Alle Messungen mit 2 ccm Kuppler wurden (falls zutreffend) gemäß ANSI S3.22-2014 und IEC 60118-0:2015 durchgeführt.

Das unauffällige XS G4

Grazil und variabel

XS – das Hinter-dem-Ohr-Hörsystem für alle, die größten Wert auf Unauffälligkeit legen. Das XS ist ideal geeignet für die offene Versorgung. Dieses Hörsystem ist perfekt zur Versorgung von leichten bis mittleren Hörverlusten.

Besondere Merkmale

- › Bis zu Vmax = 55 dB / LAmix = 125 dB
- › Kleinstes HdO-Hörsystem von Audio Service
- › Für offene und geschlossene Anpassung

Zubehör



Apps



Bedienoption

- › Programmierbarer Taster

Batterie

- › 312er Batterie



Tech Level
8 | 6 | 4 | 3

Basis

Originalgröße

Farben

	Dunkles Granit/Silber	Dunkles Granit/Grau	Dunkles Granit/Braun	Dunkles Granit	Beige
TL 4 – 8:					
TL 3 / Basis:					

XS

Tech Level

Technikausstattung

	8	6	4	3	Basis ²⁾
Signalverarbeitungskanäle	24	16	16	12	8
Frequenzkanäle	12	8	8	6	4
AGC-Kanäle	12	8	8	6	4
MPO-Kanäle	12	8	8	6	4
Hörprogramme	6	4	4	4	4
– MusicSelect / Anzahl Hörprogramme	1	-	-	-	-
– EchoClear / Enthüllung	-	-	-	-	-
– 2earPhone	-	-	-	-	-
Telefonspule	-	-	-	-	-
Data Logging	•	•	•	•	•
Wireless					
– AudioLink	•	-	-	-	-
– Binaurale Synchronisation	•	•	•	-	-
– Wireless Audio Streaming (Bluetooth®-Fernbedienung)	•	•	•	-	-
– CROS / BiCROS	• ¹⁾	-	-	-	-

Automatikfunktionen

Comfort365	•	•	•	-	-
Intelligente Acclimatic	-	-	-	-	-
Acclimatic	•	•	•	-	-
Comformatic	•	-	-	-	-

Signalverarbeitung

Anti-Feedback-System	•	•	•	•	•
Störschallmanager					
– Adaptive Störschallreduzierung	•	•	•(an/aus)	•(an/aus)	•(an/aus)
– Wiener Filter	•	•	•(an/aus)	•(an/aus)	-
– Binaurale Windgeräuschreduzierung	-	-	-	-	-
– Adaptive Windgeräuschreduzierung	•	•	-	-	-
– Impulsunterdrücker	•	•	-	-	-
– Situationsautomatik	•	-	-	-	-
– Selectronic	-	-	-	-	-
AudioTronic Multimikrofonsystem					
– Panorama	•	-	-	-	-
– Direktional statisch	•	•	•	•	•
– Automatisch	•	•	•	•	-
– Adaptiv	•	•	-	-	-
– AudioFocus 360	-	-	-	-	-
– Sprache 360	-	-	-	-	-
– AudioDirSelect	-	-	-	-	-
– AudioSpot	•	-	-	-	-
Frequenz- und Dynamikkonzept					
– TRC S	•	•	•	•	•
– Selektive Frequenzkompression	•	•	•	-	-
– HiFi-Funktionalität / Sound Upgrade	-	-	-	-	-
– Umgebungsabhängige Lautstärkeanpassung	-	-	-	-	-
Programmierbare Tinnitus-Funktion	•	•	-	-	-

Apps

Smart Connect App	•	•	•	-	-
Smart Remote App	•	•	•	•	•

• Serienausstattung • optional möglich 1) CROS RIC benötigt 2) Volta XS C

G4

SX – OPH

HdO – XS

Das flexible
DUO G5/G4

Universell einsetzbar

Die DUO Hörsysteme sind für vielfältige Hörverluste geeignet und bieten aufgrund ihrer Ausstattung umfangreiche Möglichkeiten für die Anpassung an die individuellen Bedürfnisse Ihrer Kunden. Die DUO G4 Hörsysteme können in den Tech Leveln 8 – 16 alternativ mit Batterie oder Akku genutzt werden.

Besondere Merkmale

- › Bis zu Vmax = 63 dB / LMax = 130 dB
- › Kleines Designgehäuse
- › Für offene und geschlossene Anpassung

Zubehör



Apps



Bedienoption

- › Programmierbarer Wippschalter

Batterie

- › 13er Batterie
- › Akku (G4 Tech Level 8 – 16)



Tech Level
16 | 12 | 8



Tech Level
16 | 12 | 8 | 6 | 4 | 3



Originalgröße

Farben

Table with 11 columns for color options: Dunkelblond, Dunkles Granit, Perlweiß, Silber, Granit, Braun, Grau, Beige, and three shades of Dunkelgranit/Dunkelbraun. Rows show color swatches for TL 4-16 and TL 3 models.

1) Farben in Tech Level 4 und 6 nur im tune Konzept erhältlich 2) Nur G4 3) Nur G5

DUO

G5

G4

Tech Level

Technikausstattung

Table with 9 columns (Tech Level 16, 12, 8, 6, 4, 3) and 24 rows of technical specifications including Signalverarbeitungskanäle, Frequenzkanäle, AGC-Kanäle, MPO-Kanäle, Hörprogramme, MusicSelect, EchoClear, 2earPhone, Telefonspule, Data Logging, Wireless, AudioLink, Binaurale Synchronisation, Direct Audio Streaming, and Wireless Audio Streaming.

Automatikfunktionen

Table with 9 columns and 6 rows of automatic functions: Occlumatic, Comfort365, Intelligente Acclimatic, Acclimatic, and Comformatic.

Signalverarbeitung

Table with 9 columns and 30 rows of signal processing features: Anti-Feedback-System, Störschallmanager, Adaptive Störschallreduzierung, Wiener Filter, Binaurale Windgeräuschreduzierung, Adaptive Windgeräuschreduzierung, Impulsunterdrücker, Situationsautomatik, MotionSense, Selectronic, AudioTronic Multimikrofonsystem, Panorama, Direktional statisch, Automatisch, Adaptiv, AudioFocus 360, Sprache 360, AudioDirSelect, SpatialSpot, AudioSpot, Frequenz- und Dynamikkonzept, Erweiterte Eingangsdynamik, TRC S, Selektive Frequenzkompression, HiFi-Funktionalität / Sound Upgrade, Umgebungsabhängige Lautstärkeanpassung, Programmierung via NOAHlink WL (BLE), and Programmierbare Tinnitus-Funktion.

Apps

Table with 9 columns and 3 rows of app features: Smart Direct App, Smart Connect App, and Smart Remote App.

• Serienausstattung ◯ optional möglich ■ Intensitätsgrad 1) In Verbindung mit Zubehör Smart Mic 2) CROS RIC benötigt 3) Nur in Betriebsart Audio Streaming 4) Unterstützung der Tinnitus Notch-Therapie

Das kraftvolle DUO Li-Ion G5

Praktisch und
zuverlässig

Unser erstes HdO Hörsystem mit *Bluetooth®*-Technologie und Li-Ionen Akku kombiniert innovative Technik mit bewährten Anpassungskonzepten. Immer verbunden und nie wieder Batterien wechseln.

Besondere Merkmale

- › Bis zu Vmax = ?? dB / LAmax = ?? dBB
- › Akkulaufzeit bis zu 19 Stunden Akkulaufzeit inkl. Streaming
- › Induktives Aufladen

Zubehör



Apps



Bedienoption

- › Programmierbarer Taster

Batterie

- › Lithium-Ionen-Akku



Tech Level
16 | 12 | 8

Originalgröße



Farben



DUO Li-Ion G5

Tech Level

16	12	8
Neu	Neu	Neu

ab Februar 2019

Technikausstattung

Signalverarbeitungskanäle	48	34	34
Frequenzkanäle	20	16	12
AGC-Kanäle	20	16	12
MPO-Kanäle	20	16	12
Hörprogramme	6	6	6
– MusicSelect / Anzahl Hörprogramme	3	1	-
– EchoClear / Enthüllung	•	-	-
– 2earPhone	•	•	•
Telefonspule	-	-	-
Data Logging	•	•	•
Wireless			
– AudioLink	•	•	•
– Binaurale Synchronisation	•	•	•
– Direct Audio Streaming iPhone (Android 1)	•	•	•
– CROS / BiCROS	○ ²⁾	○ ²⁾	○ ²⁾

Automatikfunktionen

Occlumatic	•	•	•
Comfort365	•	•	•
Intelligente Acclimatic	•	•	-
Acclimatic	-	-	•
Comformatic	•	•	•

Signalverarbeitung

Anti-Feedback-System	•	•	•
Störschallmanager			
– Adaptive Störschallreduzierung	•	•	•
– Wiener Filter	•	•	•
– Binaurale Windgeräuschreduzierung	■	■	-
– Adaptive Windgeräuschreduzierung	-	-	•
– Impulsunterdrücker	•	•	•
– Situationsautomatik	•	•	•
– MotionSense	•	•	-
– Selectronic	•	•	-
AudioTronic Multimikrofonsystem			
– Panorama	•	•	•
– Direktional statisch	•	•	•
– Automatisch	•	•	•
– Adaptiv	•	•	•
– AudioFocus 360	•	-	-
– Sprache 360	-	•	-
– AudioDirSelect	•	•	-
– SpatialSpot	•	-	-
– AudioSpot	-	■	■
Frequenz- und Dynamikkonzept			
– Erweiterte Eingangsdynamik	•	•	•
– TRC S	•	•	•
– Selektive Frequenzkompression	•	•	•
– HiFi-Funktionalität / Sound Upgrade	•	-	-
– Umgebungsabhängige Lautstärkeanpassung	• ³⁾	• ³⁾	• ³⁾
Programmierbare Tinnitus-Funktion	• ⁴⁾	• ⁴⁾	• ⁴⁾
Programmierung via NOAHlink WL (BLE)	•	•	•

Apps

Smart Direct App (inkl. Hörumgebungsprofil)	○	○	○
Smart Connect App	-	-	-
Smart Remote App	-	-	-

• Serienausstattung ○ optional möglich ■ Intensitätsgrad 1) In Verbindung mit Zubehör Smart Mic 2) CROS RIC G5 benötigt 3) Nur in Betriebsart Audio Streaming 4) Unterstützung der Tinnitus Notch-Therapie

Das potente
P G5/G4

Fortschrittlich und
überzeugend

Die P-Modelle von Audio Service sind Hörsysteme für
fortgeschrittene Hörverluste. Je nach technischer Aus-
stattung haben sie verschiedene Designs. Durch den
Wippschalter verfügt das P über einen hohen Bedien-
komfort.

Besondere Merkmale
> Bis zu Vmax = 77 dB / LAmax = 135 dB
> Für offene und geschlossene Anpassung (TL 4 - 16)

Zubehör
Apps

Bedienoption
> Programmierbarer
Wippschalter

Batterie
> 13er Batterie



G5 Tech Level
16 | 12 | 8

G4 Tech Level
16 | 12 | 8 | 6 | 4 | 3
Basis

Farben

	Dunkelblond	Dunkles Granit	Perlweiß	Silber	Granit	Grau	Beige	Dunkelbraun
TL 4 - 16:								
TL 3 / Basis:								

1) Farben in Tech Level 4 und 6 nur im tune Konzept erhältlich

	G5			G4							
Tech Level	16	12	8	16	12	8	6	4	3	Basis ⁵⁾	
	Neu	Neu	Neu								
Technikausstattung											
Signalverarbeitungskanäle	48	34	34	40	32	24	16	16	12	8	
Frequenzkanäle	20	16	12	20	16	12	8	8	6	4	
AGC-Kanäle	20	16	12	20	16	12	8	8	6	4	
MPO-Kanäle	20	16	12	20	16	12	8	8	6	4	
Hörprogramme	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4	
– MusicSelect / Anzahl Hörprogramme	3	1	-	3	1	1	-	-	-	-	
– EchoClear / Enthüllung	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
– 2earPhone	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	
Telefonspule	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	
Data Logging	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Wireless											
– AudioLink	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	
– Binaurale Synchronisation	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	
– Direct Audio Streaming iPhone (Android ¹⁾)	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	
– Wireless Audio Streaming (Bluetooth [®])	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	
– CROS / BiCROS	○ ²⁾	○ ²⁾	○ ²⁾	○ ²⁾	○ ²⁾	○ ²⁾	-	-	-	-	
Automatikfunktionen											
Occlumatic	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	
Comfort365	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	
Intelligente Acclimatic	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	
Acclimatic	-	-	●	-	-	●	●	●	-	-	
Comformatic	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	
Signalverarbeitung											
Anti-Feedback-System	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Störschallmanager											
– Adaptive Störschallreduzierung	●	●	●	●	●	●	●	●(an/aus)	●(an/aus)	●(an/aus)	
– Wiener Filter	●	●	●	●	●	●	●	●(an/aus)	●(an/aus)	-	
– Binaurale Windgeräuschreduzierung	■	■	-	■	■	-	-	-	-	-	
– Adaptive Windgeräuschreduzierung	-	-	●	-	-	●	●	-	-	-	
– Impulsunterdrücker	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	
– Situationsautomatik	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	
– MotionSense	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
– Selectronic	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	
AudioTronic Multimikrofonsystem											
– Panorama	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	
– Direktional statisch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
– Automatisch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	
– Adaptiv	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	
– AudioFocus 360	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
– Sprache 360	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	
– AudioDirSelect	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	
– SpatialSpot	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
– AudioSpot	-	■	■	■	■	■	-	-	-	-	
Frequenz- und Dynamikkonzept											
– Erweiterte Eingangsdynamik	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	
– TRC S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
– Selektive Frequenzkompression	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	
– HiFi-Funktionalität / Sound Upgrade	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	
– Umgebungsabhängige Lautstärkeanpassung	● ³⁾	● ³⁾	● ³⁾	● ³⁾	-	-	-	-	-	-	
Programmierbare Tinnitus-Funktion	● ⁴⁾	● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	●	●	●	-	-	-	
Apps											
Smart Direct App (inkl. Hörumgebungsprofil)	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	
Smart Connect App	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	
Smart Remote App	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	

• Serienausstattung • optional möglich ■ Intensitätsgrad 1) In Verbindung mit Zubehör Smart Mic 2) CROS RIC benötigt 3) Nur in Betriebsart Audio Streaming 4) Unterstützung der Tinnitus Notch-Therapie 5) Volta P C

Das leistungsfähige HP G4

Für hochgradige Hörverluste

Das High-Power-Hörsystem HP ist die Audio Service-Lösung für hochgradig Schwerhörige. Mit getrennten Bedienelementen für Programmwahl und Lautstärke-regelung lässt sich das HP Hörsystem komfortabel einstellen.

Besondere Merkmale

- › Bis zu Vmax = 82 dB / LAmax = 140 dB
- › Leistungsstark für den hochgradigen Hörverlust
- › Audioschuh optional für direkten Audio-Eingang

Zubehör



Apps



Bedienoption

- › Taster und programmierbarer Wippschalter

Batterie

- › 675er Batterie



Tech Level
16 | 12 | 8 | 6 | 4 | 3

Basis

HP – HP



HP G4 TL 4 – 16



HP G4 TL 3/Volta HP C

Originalgröße

Farben

	Dunkles Granit	Grau	Beige	Dunkelbraun
TL 4 – 16:				
TL 3 / Basis:				

HP

G4

Tech Level

Technikausstattung

	16	12	8	6	4	3	Basis ³⁾
Signalverarbeitungskanäle	40	32	24	16	16	12	8
Frequenzkanäle	20	16	12	8	8	6	4
AGC-Kanäle	20	16	12	8	8	6	4
MPO-Kanäle	20	16	12	8	8	6	4
Hörprogramme	6	6	6	4	4	4	4
– MusicSelect / Anzahl Hörprogramme	3	1	1	-	-	-	-
– EchoClear / Enthallung	•	-	-	-	-	-	-
– 2earPhone	•	•	•	-	-	-	-
Telefonspule	•	•	•	•	•	•	•
Data Logging	•	•	•	•	•	•	•
Wireless							
– AudioLink	•	•	•	-	-	-	-
– Binaurale Synchronisation	•	•	•	•	•	-	-
– Wireless Audio Streaming (Bluetooth®-Fernbedienung)	○	○	○	○	○	-	-
– CROS / BiCROS	○ ¹⁾	○ ¹⁾	○ ¹⁾	-	-	-	-

Automatikfunktionen

Comfort365	•	•	•	•	•	-	-
Intelligente Acclimatic	•	•	-	-	-	-	-
Acclimatic	-	-	•	•	•	-	-
Comformatic	•	•	•	-	-	-	-

Signalverarbeitung

Anti-Feedback-System	•	•	•	•	•	•	•
Störschallmanager							
– Adaptive Störschallreduzierung	•	•	•	•	•(an/aus)	•(an/aus)	•(an/aus)
– Wiener Filter	•	•	•	•	•(an/aus)	•(an/aus)	-
– Binaurale Windgeräuschreduzierung	■	■	-	-	-	-	-
– Adaptive Windgeräuschreduzierung	-	-	•	•	-	-	-
– Impulsunterdrücker	•	•	•	•	-	-	-
– Situationsautomatik	•	•	•	-	-	-	-
– Selectronic	•	•	-	-	-	-	-
AudioTronic Multimikrofonsystem							
– Panorama	•	•	•	-	-	-	-
– Direktional statisch	•	•	•	•	•	•	•
– Automatisch	•	•	•	•	•	•	-
– Adaptiv	•	•	•	•	-	-	-
– AudioFocus 360	•	-	-	-	-	-	-
– Sprache 360	-	•	-	-	-	-	-
– AudioDirSelect	•	•	-	-	-	-	-
– AudioSpot	■	■	■	-	-	-	-
Frequenz- und Dynamikkonzept							
– TRC S	•	•	•	•	•	•	•
– Selektive Frequenzkompression	•	•	•	•	•	-	-
– HiFi-Funktionalität / Sound Upgrade	•	•	-	-	-	-	-
– Umgebungsabhängige Lautstärkeanpassung	• ²⁾	-	-	-	-	-	-
Programmierbare Tinnitus-Funktion	•	•	•	•	-	-	-

Apps

Smart Connect App	○	○	○	○	○	-	-
Smart Remote App	○	○	○	○	○	○	○

• Serienausstattung ○ optional möglich ■ Intensitätsgrad 1) CROS RIC benötigt 2) Nur in Betriebsart Wireless Audio Streaming 3) Volta HP C

HP – HP

Wireless CROS / BiCROS – die Umleitung von Schall von einem auf das andere Ohr

Für Menschen, die einseitig einen nicht versorgbaren Hörverlust haben, ist Kommunikation häufig schwierig, da sie nicht von beiden Seiten ansprechbar sind.



Wireless CROS

Menschen mit einem normal hörenden Ohr kann eine Wireless CROS-Versorgung (Contralateral Routing of Signals) helfen. Auf der nicht versorgbaren Seite wird das CROS RIC getragen, das über die Mikrofone den Schall aufnimmt.

Der Schall wird drahtlos per AudioLink zum Empfangsgerät am kontralateralen Ohr übertragen und hier an das normalhörende Ohr abgegeben.

Wireless BiCROS

Menschen mit einem durch ein Hörsystem versorgbaren Hörverlust auf der anderen Seite (kontralateral) kann eine Wireless BiCROS-Versorgung helfen. Auf der nicht versorgbaren Seite wird das CROS RIC getragen, das über die Mikrofone den Schall aufnimmt.

Der Schall wird drahtlos per AudioLink zum auf den Hörverlust angepassten Hörsystem am anderen Ohr übertragen.

Wireless CROS / BiCROS
ist optional in TL 8 – 16 mit diesen Hörsystemen einsetzbar:



- › Icon G5
- › Sina G5
- › quiX G5



- › Mood G5
- › Mood Li-Ion G5
- › Sun G5
- › DUO G5
- › DUO Li-Ion G5
- › P G5
- › Ida BT G5



- › Icon Mini-CIC G4
- › Sina G4
- › Vega G4
- › Ida G4
- › quiX G4
- › Mood G4
- › Sun G4
- › Sun Li-Ion G4
- › XS G4
- › DUO G4
- › P G4
- › HP G4



Im Detail

Zubehör & Apps



Unser Produkt-Zubehör in der Übersicht

Nützliche Lösungen bieten für jede
Situation mehr Komfort und Hörgenuss



Multidimensional vernetzt
in bester Begleitung



Komfortabel und aktiv
den Alltag genießen



Smart
Transmitter
2,4



Smart
Mic



Smart
Li-Ion Power



Smart
Power

IdO	Icon	–	–	–	–
	Sina	–	–	–	–
	Vega	–	–	–	–
	Ida	TL 8 – 16	TL 8 – 16	–	–
RIC	quiX	–	–	–	–
	Rixx	–	–	–	–
	Mood	TL 8 – 16	TL 8 – 16	–	TL 8 – 16
	Mood Li-Ion	TL 8 – 16	TL 8 – 16	TL 8 – 16	–
	Sun	TL 8 – 16	TL 8 – 16	–	TL 8 – 16
	Sun Li-Ion	–	–	TL 6 – 16	–
HdO	XS	–	–	–	–
	DUO	TL 8 – 16	TL 8 – 16	–	TL 8 – 16
	DUO Li-Ion	TL 8 – 16	TL 8 – 16	TL 8 – 16	–
	P	TL 8 – 16	TL 8 – 16	–	–
	HP	–	–	–	–



Smart
Connect¹⁾



Smart
Transmitter²⁾



Smart
Remote¹⁾



Smart
Key

TL 4 – 16	TL 4 – 16	TL 4 – 16	TL 3 – 16
TL 4 – 16	TL 4 – 16	TL 4 – 16	TL 3 – 16
TL 4 – 16	TL 4 – 16	TL 4 – 16	TL 3 – 16
TL 4 – 16	TL 4 – 16	TL 4 – 16	TL 4 – 16
TL 4 – 16	TL 4 – 16	TL 4 – 16	TL 3 – 16 / Basis
–	–	–	TL 4 – 16
TL 4 – 16	TL 4 – 16	TL 4 – 16	TL 4 – 16
–	–	–	TL 8 – 16
TL 8 – 16	TL 8 – 16	TL 8 – 16	TL 8 – 16
TL 6 – 16	TL 6 – 16	TL 6 – 16	TL 6 – 16
TL 4 – 8	TL 4 – 8	TL 4 – 8	TL 3 – 8 / Basis
TL 4 – 16	TL 4 – 16	TL 4 – 16	TL 3 – 16
–	–	–	TL 8 – 16
TL 4 – 16	TL 4 – 16	TL 4 – 16	TL 3 – 16 / Basis
TL 4 – 16	TL 4 – 16	TL 4 – 16	TL 3 – 16 / Basis

1) Gültig für Modelle mit Wireless-Funktionalität 2) Ergänzendes Zubehör zur Smart Connect

ZUBEHÖR & APPS

ZUBEHÖR & APPS

Der praktische Smart Transmitter 2,4

Der *Bluetooth®* Sender für Fernseher und Stereoanlage

G5 Ida BT G5, Sun G5, Mood G5, Mood Li-Ion G5, DUO G5, DUO Li-Ion G5, P G5



Besondere Merkmale

- › Keine separate Fernbedienung mehr notwendig
- › Besonders einfaches Koppeln / Pairing
- › Mehrere Hörsystemnutzer können sich gleichzeitig verbinden
- › Audioeingänge analog und digital (Cinch und TOSLINK)

Mittels des Smart Transmitter 2,4 funktioniert die direkte Übertragung der Töne von Audioquellen (Fernseher oder Stereoanlage) auf die Hörsysteme voll automatisch. Einfach die Hörsysteme auf den Transmitter legen und der Kopplungsprozess beginnt. Für ein gemeinsames Erlebnis kann der Transmitter mit mehreren Hörsystemen gleichzeitig gekoppelt werden.

Das kompakte Smart Mic

Direktes Audio-Streaming von praktisch jedem bluetoothfähigen Android-Smartphone

G5 Ida BT G5, Sun G5, Mood G5, Mood Li-Ion G5, DUO G5, DUO Li-Ion G5, P G5



Besondere Merkmale

- › Direct Streaming von Android Smartphones
- › Musikhören in Stereoqualität
- › Als Konferenzmikrofon einsetzbar

Das neue Smart Mic ermöglicht freihändige Telefonate, ohne dass Ihr Kunde sein Smartphone in die Hand zu nehmen braucht. In herausfordernden Hörumgebungen ist es einfach als zusätzliches Mikrofon zu nutzen.

Die schnelle Smart Li-Ion Power

Induktiv schnell laden

G5 Mood Li-Ion G5, DUO Li-Ion G5

G4 Sun Li-Ion G4



Besondere Merkmale

- › Trocknungsfunktion während des Ladens
- › Automatisches Ausschalten der Hörsysteme beim Einlegen in die Ladestation und Einschalten beim Herausnehmen
- › Überladeschutz wird durch Abschaltautomatik gewährleistet
- › Standard-Netzteil mit Micro-USB-Anschluss
- › Kompatibel mit Standard-Powerbanks

Die effektive Smart Power

Die Alternative zu herkömmlichen Hörsystem-Batterien

G4 Sun G4, Mood G4, DUO G4



Besondere Merkmale

- › Praktische Akkuladestation
- › Umweltbewusst
- › Lädt und trocknet Hörsysteme über Nacht

Mit Smart Power gehört ständiges Auswechseln der Hörsystem-Batterien der Vergangenheit an. Die Akkus der Hörsysteme lädt die Smart Power sicher und schnell auf. Hierdurch wird ein ständiges Auswechseln der Batterien vermieden.

Die komfortable Smart Connect

Drahtlose Verbindung mit vielen Kommunikationsmedien



Komfortabel Musik hören, fernsehen oder telefonieren, auch via Internet – alles ist möglich. Die Smart Connect erkennt das Hörsystem, das Koppeln erfolgt automatisch. Die Bedienung erfolgt einfach und komfortabel über den Multifunktionsknopf oder alternativ per Smart Connect App.

Besondere Merkmale

- › Einfach in Connexx aktivieren, ohne Programmierung einsatzbereit
- › Einfaches und schnelles Pairen mit den Hörsystemen
- › Einfache Bedienung über den Multifunktionsknopf
- › Audioeingang
- › Auch als Freisprecheinrichtung nutzbar durch eingebautes Mikrofon

Der vielfältige Smart Transmitter

Verbindet nicht-bluetoothfähige Audioquellen mit der Smart Connect



Als Zubehör für die Smart Connect verbindet der Smart Transmitter elektronische Geräte, die nicht über eine Bluetooth®-Funktion verfügen, mit der Smart Connect. Die Tasten auf der Oberseite sorgen für eine einfache und intuitive Bedienung, die LEDs an der Vorderseite informieren über den aktuellen Status des Transmitters.

Besondere Merkmale

- › Modernes Infotainment mit Smart Transmitter und Smart Connect
- › Wird direkt mit der Audioquelle verbunden
- › 3,5 mm Klinkenbuchse und optischer TOSLINK-Anschluss

Die effektive Smart Remote

Formschön und funktional



Die Fernbedienung ist mit allen Hörsystemen mit Wireless-Funktion nutzbar. Das zeitlose Design, die großen Tasten sowie das übersichtlich gestaltete Display sind nur einige ihrer nutzerfreundlichen Eigenschaften. Standardmäßig bietet die Smart Remote folgende Funktionen: Wechsel der Hörprogramme, Einstellen der Lautstärke, Ein- und Ausschalten der Hörgeräte.

Besondere Merkmale

- › Mit Standardfunktionen vorprogrammiert
- › Tasten individuell programmierbar
- › Alarmfunktion
- › Serviceinformationen programmierbar: Kontaktinformationen und Servicetermin-Erinnerung
- › Lautstärke der Tinnitus-Funktion einstellbar

Die handliche Smart Key

Klein und praktisch



Mit der Smart Key lassen sich unkompliziert die Programme und die Lautstärke verstellen. Eine Tastensperre verhindert das unabsichtliche Drücken der Tasten. Eine Status-LED informiert darüber, ob die Fernbedienung aktiv ist.

Besondere Merkmale

- › Klein und handlich
- › Steuerung über hochfrequente Töne

Die umfassende Smart Direct App


Alle Funktionen zur komfortablen Individualisierung

G5 Ida BT G5, Sun G5, Mood G5, Mood Li-Ion G5, DUO G5, DUO Li-Ion G5, P G5

Die Smart Direct App bietet Ihren Kunden die Möglichkeit, ihr Hörsystem komfortabel zu bedienen und neue Features individuell zu nutzen. Telefonate werden vom iPhone direkt übertragen und haben Priorität vor anderen Audiosignalen, gestreamte Musik kann direkt und ohne Zusatzgerät in Stereo gehört werden. Mit der App werden Smartphones zur Fernbedienung für G5-Hörsysteme.

Besondere Merkmale

- › Hörprogramme und Lautstärke lassen sich diskret einstellen
- › Die Lautstärke für rechtes und linkes Hörsystem ist separat einstellbar
- › Die Smart Direct App erstellt ein Umgebungsprofil ihres Nutzers. Das erleichtert Ihnen die Optimierung bei der Feinanpassung und Nachsorge.

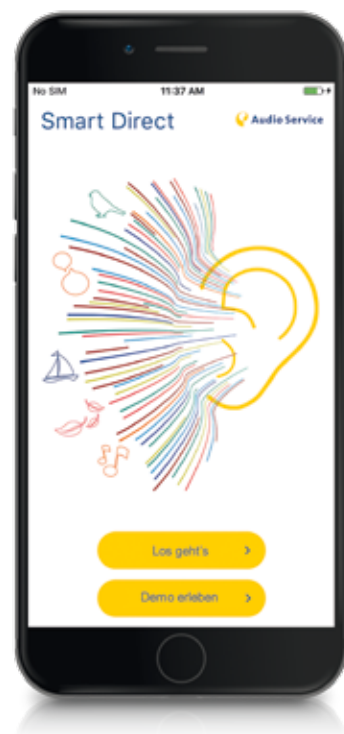

Smart Direct App
jetzt downloaden



Die praktische Smart Connect App


Die optimale Ergänzung zur Smart Connect



Mit der App lässt sich die Smart Connect besonders komfortabel bedienen und bietet noch mehr Funktionen. So können z. B. Audioquellen direkt angewählt werden.



Smart Connect App
jetzt downloaden

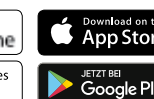

Besondere Merkmale

- › Bedienoptionen für TL 12- und 16-Hörsysteme:
AudioSpot – Fokus individuell
AudioDirSelect – Richtung individuell

Die bewährte Smart Remote App


Die App zur direkten Steuerung aller Audio Service Hörsysteme



Mit der kostenlosen Smart Remote App wird das Smartphone zur diskreten Fernbedienung für die Hörsysteme. Mit der App können die Individualisierung und Bedienung der Hörsysteme für folgende Einstellungen vorgenommen werden: Hörprogramm, Lautstärke und Klang, ohne dass weiteres Zubehör benötigt wird.



Smart Remote App
jetzt downloaden

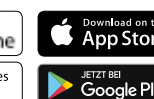

Besondere Merkmale

- › Steuerung über hochfrequente Töne
- › Sendelautstärke einstellbar
- › Einstellung Rauschen (Tinnitus)
- › Auslesen des Batteriestatus
- › Bedienoptionen für TL 12- und 16-Hörsysteme:
AudioSpot – Fokus individuell
AudioDirSelect – Richtung individuell

Anpass-Zubehör IdO-Hörsysteme

Nützliches für die
tägliche Praxis

HF Black Hörerfilter – Premium-Schutz serienmäßig

Dringen Cerumen, Feuchtigkeit oder Schmutz über die Schallaustrittsöffnung zu den empfindlichen Bauteilen des Hörsystems vor, kann es zu Funktionsstörungen kommen. Die von Audio Service entwickelten HF Black Hörerfilter sorgen für einen zuverlässigen Schutz der Hörsysteme:

- › Selbstreinigungseffekt durch schwarze Hightech Filtergaze
- › Besonders feuchtigkeits-, schmutz- und cerumenabweisend
- › Das Ergebnis: längere Austauschintervalle der Hörerfilter sowie Verlängerung der Lebensdauer der Hörsysteme

Der Premium-Hörerfilter ist in den Größen HF 3 Black ø 3,1 mm und HF 4 Black ø 2,4 mm erhältlich. Die Farben rot und blau dienen gleichzeitig der Seitenerkennung der Hörsysteme.

HF Black wird standardmäßig bei der Auslieferung von IdOs, CLIC MOULDS und quiX MOULDS eingesetzt.



Schwarze Hightech-Filtergaze weist Feuchtigkeit, Schmutz und Cerumen ab.

16er-Spenderrad mit Wechselstift


Vorteile der innovativen HF Black Hörerfilter

- › Besonders feuchtigkeits-, schmutz- und cerumenabweisend
- › Praktisch und einfach in der Anwendung
- › Robust und wartungsreduziert
- › Verzerrungsarm bis 90 % Verschmutzung
- › Akustisch transparent
- › Verlängerung der Lebensdauer der Hörsysteme

Der Mikrofonfilter Microsafe

Das weltweit erste wechselbare Mikrofonfiltersystem für IdOs reduziert Windgeräusche effektiv direkt am Ohr. Der integrierte und von außen wechselbare Filter blendet die störenden Windgeräusche systematisch aus, ohne die gewünschten Sprachsignale zu beeinträchtigen. Gleichzeitig schützt der Filter vor Verschmutzungen.

Das Ergebnis: verbesserter Hörkomfort und eine längere Lebensdauer des Hörsystems. Microsafe ist mit nur 1,85 Millimetern Durchmesser deutlich kleiner als die Hörerfilter. Serienmäßig bei allen semimodularen IdO-Hörsystemen. In den Farben Beige, Braun und Mokka erhältlich.

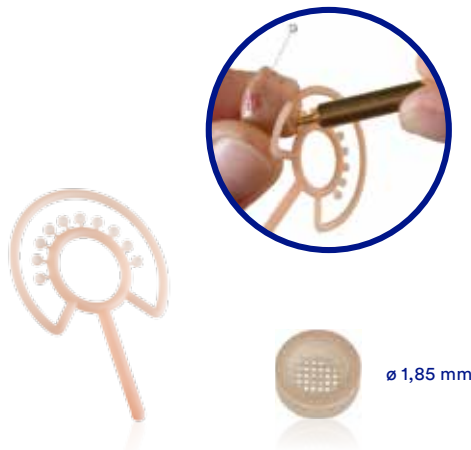

ø 1,85 mm

Bestelloptionen IdO-Hörsysteme

Der Profi-Vent

Die optimale Ausführung des Vents bei Im-Ohr-Hörsystemen muss einen guten Kompromiss zwischen Klang und Okklusionsfreiheit darstellen.

Moderne computergestützte Verfahren im Zusammenspiel mit großer handwerklicher Erfahrung führen zu einer individuellen optimalen Vентаusführung, dem Profi-Vent.

Den Profi-Vent gibt es in zwei Ausführungen:

EquiVent

Ziel ist es, die kleinste IdO-Baugröße bei akustisch gleichwertigem Verhalten zu einem runden Vent zu finden (AEV – acoustically equivalent vent).

ComforVent

Ziel ist es, die beste Balance zwischen Okklusionsfreiheit und angenehmem Klang zu finden (AOV – acoustically optimized vent).



EquiVent zur Reduktion der Bauhöhe

Im Vergleich: konventioneller Vent

Oberflächenschutz

Spezielle Beschichtungen schützen alle Hörsysteme vor Verschmutzung. Zusätzliche Dichtungen und Versiegelungen bieten bei ausgewählten Hörsystemen erweiterten Schutz.

Die serienmäßige Oberflächenbeschichtung **ComforClean** lässt Schmutz und Feuchtigkeit jeglicher Art – z. B. Cerumen, Schweiß und Staub – leicht von der Oberfläche des Hörsystems abperlen und verhindert, dass er sich auf der Oberfläche festsetzt. So ist das Hörsystem geschützt und die Reinigung besonders einfach.

Optional können die IdO-Hörsysteme mit der Nano-Veredelung **ComforMed** beschichtet werden. ComforMed nutzt die fungizide und biozide Wirkung von reinem Silber und wirkt gegen Bakterien und Keime. Dadurch erhöht sich der Tragekomfort von IdO-Hörsystemen wesentlich, die klimatischen Verhältnisse im Gehörgang werden günstig beeinflusst und so wird das natürliche Gleichgewicht im Ohr unterstützt.




Anpass-Zubehör RIC-Hörsysteme

Umfangreiche Möglichkeiten – flexible
Lösungen: Ex-Hörer und Ohrpasstücke

Kleine Ex-Hörer mit großer Leistung

Die bewährten Ex-Hörer – für jeden Hörverlust und
jedes Ohr die optimale Lösung.

- › 3 Verstärkungsvarianten
- › Bis zu 5 verschiedene Längen
- › Platzsparender und robuster Höreranschluss
- › Optimale Positionierung der Hörer im Gehörgang

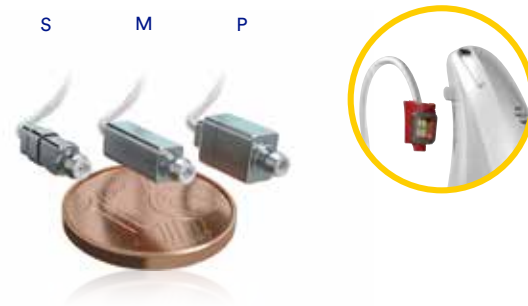

Individuelle Anpassung der RIC-Hörsysteme mit CLIC MOULD 2.0

Die **CLIC MOULD 2.0** ist die Otoplastik für externe
Hörer. Die Mini-Receiver und der Einsatz des kleinen
Hörerfilters **HF 4 Black** ermöglichen den Bau sehr kleiner
CLIC MOULDS für eine noch kosmetischere Anpassung.

- › Passend für alle 3 Verstärkungsvarianten der Ex-Hörer
- › 2 Varianten: Standard und Lang
- › 2 Ausführungen: Open und Power
- › Kompatibel mit dem AudioFix-System
- › Clic Ball für die individuelle Ausrichtung
am Ohr und optimalen Halt

Vorteile der CLIC MOULD 2.0

- › Einfache Handhabung
- › Sicherer und zuverlässiger Halt
- › Professionelles CLIC-System
- › Um 360° drehbare Hörerlagerung für
die optimale Ausrichtung am Ohr



Anpassungsvarianten beim quiX

Für quiX-Hörsysteme gibt es drei verschiedene
Standard-Ohrpasstücke für die Sofortanpassung.

quiX MOULD

Harte offene Standard-Otoplastik in 3 Größen: S, M und L.

Click Sleeve

Flexibel und weich, passt sich perfekt an die Gehörgangs-
geometrie an, 4 Größen, jeweils Open (vented) und Closed.

Click Dome

Alle Größen und Ausführungen einsetzbar.



Sofortige Anpassung mit Click Dome und Click Sleeve

Click Domes und Click Sleeves sind die ideale Lösung für
die schnelle Anpassung der Audio Service RIC-Hörsysteme:
Ihr Kunde kann sein Hörsystem sofort mitnehmen und
ausprobieren. Verschiedene Ausführungen und Größen der
Domes oder Sleeves bieten auch bei der Sofortanpassung
viel Flexibilität.

Der **Clic Ball** des Ex-Hörers ist nach dem Einrasten im
Dome oder Sleeve drehbar. Dies sorgt für einen hohen
Tragekomfort und optimalen Sitz am Ohr.



Filtersysteme

Die Ex-Hörer sind mit **wechselbaren RIC-Hörerfiltern**
versehen, die die Hörer vor Verschmutzung schützen.
Die Filter sind inklusive Wechselstift als Zubehör erhältlich.

Unser Tipp: Wechseln Sie die RIC-Hörerfilter bei jedem
Service-Termin.

Bei der Sofortanpassung bietet das in den Dome oder
Sleeve integrierte Gitter zusammen mit dem RIC-Hörer-
filter einen **zweifachen Schutz**.

Auch bei der individuellen Anpassung mit CLIC MOULD
werden die Ex-Hörer perfekt geschützt: **Der kleine
Hörerfilter HF4 Black** sorgt in Kombination mit dem
RIC-Hörerfilter für doppelten Schutz vor Cerumen,
Schmutz und Feuchtigkeit.



Anpass-Zubehör HdO-Hörsysteme

Praktische Lösungen für
die klassische Versorgung

Audio Service Otoplastiken

Für alle HdO-Hörsysteme bieten wir ein umfangreiches Sortiment an Otoplastiken aus Acryl und Biopor®:

- › Große Auswahl an Bauformen
- › Mit unterschiedlichen Vents
- › Abformungsdaten werden für mindestens sechs Monate archiviert, so dass auf Wunsch die Fertigung eines individuellen Im-Ohr-Hörsystems auf Basis dieser Daten möglich ist
- › Standardmäßig mit Seriennummer
- › Umfangreiche Farbauswahl
- › Bis zu drei Farben in einer weichen Otoplastik
- › Verzierungen, z. B. farbige Blumen, möglich

Alle Otoplastiken können optimal auf die individuellen Bedürfnisse des Kunden abgestimmt werden – Einzelheiten über die vielfältigen Möglichkeiten entnehmen Sie bitte dem Bestellformular.

Otoplastiken aus Acryl

- › Hohe Passgenauigkeit durch computergestützte Fertigung
- › Serienmäßig mit der wasser- und schmutzabweisenden Oberflächenbeschichtung ComforClean, optional sind weitere Oberflächenveredelungen möglich

Otoplastiken aus Biopor®

- › Ideal für druckempfindliche Ohren und große Hörverluste
- › Erhältlich in drei Shore-Härten: 70, 40 und 25 Shore



Beispiele verschiedener Bauformen und Farben

Open Tip

Audio Service Thin Tubes mit Open Tip für die Sofortanpassung.

- › Schneller Einstieg in die offene Versorgung
- › Für eine sofortige Anpassung



Open Tip
in 4, 6, 8 und 10 mm



Bass Tip
in 8/10 und 10/12 mm

Thin Tube

Der Thin Tube sorgt für noch mehr Unauffälligkeit und optimalen Sitz am Ohr.



Audio Service AudioFix

Die überzeugende und individuelle Lösung für die offene HdO-Versorgung: AudioFix mit Open Folie. Mit dem Klemmsystem AudioFix wird der längenvariable Schlauch mit der Open Folie optimal am Ohr ausgerichtet und individuell fixiert.

- › Besonders unauffällig und sicher
- › Schneller Schlauchwechsel dank intelligenter Klemmhülse
- › Große Offenheit und hervorragende Kosmetik dank Open Folie
- › Sicherer Halt im Ohr und daher ideal für Brillenträger
- › Extrem einfach in der Handhabung

Vorteile des AudioFix

Mit AudioFix stellen Sie Ihr handwerkliches Können unter Beweis und überzeugen Ihre Kunden vom Mehrwert einer individuellen Hörsystem-Anpassung.



Weiteres Zubehör Alle Bauformen

Audio Service Batterien

Ein ganz besonderer Service: Wir bieten spezielle Batterielisten an, die sich mit Ihrem Logo individualisieren lassen.



Helfer für viele Bereiche

Eine Auswahl an sinnvollen und durchdachten Werkzeugen erleichtert Ihnen die Serviceleistungen, die Sie Ihrem Endkunden bieten können.



